

GoTo

Manuel d'utilisation

Siège ajustable et transportable
pour enfants



GoTo est un siège modulable, léger et facilement transportable assurant le maintien de votre enfant dans les activités du quotidien. Vous pouvez utiliser le GoTo en toute sécurité en intérieur ou en extérieur.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel avant l'utilisation du GoTo. Ces instructions peuvent être téléchargées à partir de notre site Internet www.fireflyfriends.com. Vous pouvez consulter des vidéos, des schémas et télécharger des documents contenant des informations pratiques.

Sommaire

01 Usages prévus	p.03
02 Déclaration de conformité	p.04
03 Conditions de la garantie	p.04
04 Consignes de sécurité	p.05
05 Consignes de nettoyage et d'entretien	p.06
06 Service après-vente	p.08
07 Recommandations principales	p.08
08 Vérification du produit	p.09
09 Reprise des produits Firefly	p.09
10 Installation de votre siège GoTo	p.10
11 Utiliser le siège GoTo relié à un dossier rigide	p.12
12 Utiliser le siège GoTo sur un chariot de supermarché	p.16
13 Attacher le siège GoTo à l'accessoire Floorsitter	p.17
14 Positions d'inclinaisons recommandées	p.19
15 Démontage du GoTo pour enlever les housses	p.22
16 Enlever le rembourrage du dossier et assembler le GoTo	p.26
17 Guide des tailles	p.29

Chapitre 1: Usages prévus

Le siège GoTo a été conçu pour fournir un soutien postural du haut du corps pour les enfants en situation de handicap. Le siège GoTo doit impérativement être attaché à une chaise ou à un support similaire afin d'être stable et permettre une utilisation en toute sécurité. Le siège GoTo est conçu pour une utilisation occasionnelle car il a un soutien limité et il ne prévient pas les escarres. Il ne doit donc pas être utilisé comme siège principal pour un enfant handicapé.

Le siège Goto doit être sécurisé en étant attaché à un support rigide et stable en utilisant l'ensemble des sangles de fixation noires.

L'enfant ne doit pas être placé dans le siège GoTo si son support n'est pas stable. Il faut être conscient des capacités de votre enfant et l'observer à tout moment.

Le siège GoTo est disponible dans 2 tailles. Taille 1 : pour les enfants âgés de 1 à 3 ans avec un poids maximum de 15 kg*. Taille 2 : pour les enfants âgés de 3 à 8 ans avec un poids maximum de 30 kg*. Pour plus d'informations sur les tailles consulter le chapitre 17 de ce manuel.



* Veuillez noter que le poids maximal d'un enfant placé dans un chariot de supermarché standard est de 13 kg.

Nous déclinons toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors des usages prévus. Les activités quotidiennes testées et approuvées par Firefly de Leckey sont l'utilisation du siège GoTo dans les activités mentionnées ci-dessous :

1. Fixé à une chaise avec un dossier rigide lors d'un dîner en famille ou entre amis.
2. Pour une utilisation dans un chariot de supermarché permettant aux parents de réaliser ses courses plus facilement.
3. Le Goto est conçu pour une utilisation sur une balançoire ayant un siège bébé uniquement. Il permet alors à l'enfant de profiter pleinement de l'activité. Le siège GoTo doit s'adapter parfaitement au siège de la balançoire pour bébé. Néanmoins si celui-ci dépasse de la balançoire, il est formellement déconseillé de l'utiliser. Le siège GoTo ne convient pas pour une utilisation sur une balançoire classique. Son utilisation doit rester sous la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité de l'enfant. La conception des balançoires étant très différente d'un modèle à un autre, il est conseillé d'évaluer la situation et les risques avant de l'utiliser et d'y placer votre enfant.

4. Avec la plateforme à inclinaisons variables Floorsitter. Ayez conscience que lorsque votre enfant utilise le GoTo, il peut se déplacer légèrement sur le sol, si c'est le cas, la plateforme Floorsitter doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

En cas de doute, vous pouvez contacter le service clients de Firefly de Leckey via l'adresse mail suivante : enquiries@fireflyfriends.com.

CHAPITRE 2 : Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en tant que fabricant responsable de la marque Firefly, déclare que le siège GoTo est conforme aux exigences de la directive Européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC . Il répond également aux exigences générales et aux méthodes de test de la norme EN12182.

CHAPITRE 3 : Condition de la garantie

La garantie pour le siège s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément aux usages prévus par le fabricant. Le produit est garanti 1 an par le fabricant James Leckey Design Ltd.

Les produits sont garantis 12 mois, dans ce cadre vous pouvez nous les retourner pour procéder à une réparation ou à un échange. Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour récupérer le produit et procéder à son remplacement ou sa réparation. A réception de la marchandise le fabricant James Leckey Design Ltd. retournera le produit sous un délai de 14 jours au distributeur qui vous le fera parvenir.

Dans tous les cas, il incombe aux clients de s'assurer que le produit est convenablement emballé, de préférence dans son emballage d'origine.

CHAPITRE 4 : Consignes de sécurité

1. Toujours lire le manuel d'utilisation dans son intégralité avant l'utilisation du produit.
2. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation du produit.
3. Toujours vérifier la compatibilité et la stabilité de chaque support chaise/chariot/balanoïre avant d'adapter et de fixer le siège GoTo.
4. Toujours s'assurer que le siège GoTo soit solidement fixé avant son utilisation et que l'ensemble des sangles soient serrées.
5. Le siège GoTo n'a pas été testé en cas de collision et ne peut donc pas être utilisé dans les transports. Certaines compagnies aériennes autorisent son utilisation. Vérifiez avant de prendre un vol.
6. Ne jamais utiliser le siège GoTo dans un chariot de supermarché s'il y a une pente supérieure à 10° pour éviter tout risque de chute.
7. Si le siège GoTo est utilisé dans un siège de balanoïre pour bébé vous ne devez pas le pousser avec une force excessive. Quand votre enfant est dans la balanoïre, il est nécessaire de le surveiller à tout moment.
8. Toujours attacher la plateforme à inclinaisons variables et régler l'angle d'inclinaison avant de placer votre enfant dans le GoTo.
9. La plateforme à inclinaisons variables doit toujours être utilisée sur une surface plane, ferme et solide.
10. Le siège GoTo contient des pièces pouvant présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Vérifier que tous ses composants soient solidement fixés et serrés avant son utilisation, y compris les boutons et les sangles.
11. Ne pas modifier le siège GoTo. Le non-respect de ces instructions peut mettre votre enfant en danger et invalider la garantie.
12. Le GoTo doit être entreposé avec soin et ne pas être utilisé si des pièces sont défectueuses. Il est préférable de le ranger à plat pour prévenir d'éventuels dommages.
13. Tenir le GoTo éloigné de toute source directe de chaleur, y compris des flammes, des cigarettes et chauffages électriques ou à gaz.
14. Si vous avez des doutes sur l'utilisation du GoTo ou si des pièces sont défectueuses, cessez de l'utiliser et contactez le service client de Firefly/Leckey à l'adresse mail suivante : customer.enquiries@fireflyfriends.com.

CHAPITRE 5 : Consignes de nettoyage et d'entretien

Châssis plastique du GoTo

1. Lors du nettoyage de la structure en plastique du GoTo, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif tel que du liquide vaisselle.
2. Vous pouvez utiliser des lotions désinfectantes telles que l'éthanol et l'isopropanol sur la structure du siège en plastique.
3. Ne jamais utiliser de solvants organiques ou un liquide de nettoyage à sec.

Housses en tissu


1. Nettoyez et prenez régulièrement soin des housses en tissu. Pour cela, il suffit d'aspirer les housses pour enlever les poussières et particules, puis essuyer avec un chiffon humide pour un nettoyage plus en profondeur.
2. L'utilisation de chiffons en microfibres sans savon est très efficace et utile, car le savon peut encrasser les tissus.
3. Les housses du siège peuvent être enlevées de la structure et lavées à la machine à 40°.
4. Sécher les housses à plat. Ne pas utiliser le sèche-linge.
5. Placez les housses dans la machine à laver après avoir retiré les boucles, les sangles et les attaches au préalable. Ensuite, les ranger dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
6. Les housses peuvent être lavées à la main. Si des aliments solides se sont renversés sur la housse, racler à l'aide d'une spatule. Nettoyer le tissu à l'aide d'un détergent doux à base d'eau, faire mousser et éponger avec un tissu absorbant, une serviette ou une éponge.
7. Pour nettoyer les housses sans trop les mouiller ou endommager la couleur du tissu, utiliser des produits adaptés spécialement conçus pour les tissus d'ameublement.
8. Nettoyer les reflux immédiatement. Plus la tâche reste de manière prolongée sur le tissu plus il est difficile de l'enlever. Cela peut entraîner une perte de couleur permanente.
9. Eponger les reflux de l'enfant avec une éponge, de l'eau chaude et du savon. Eviter de frotter avec le côté abrasif de l'éponge car cela pourrait endommager le tissu.
10. Des produits antiseptiques peuvent être utilisés sur des tâches tenaces. Des produits désinfectants tels que de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol sont appropriés pour être utilisés sur le GoTo. Veuillez laisser le produit sécher à l'air libre en veillant à ce que l'alcool soit évaporé avant son utilisation.

11. Ne pas mettre les housses sur la structure en plastique du GoTo si celles-ci sont humides. Veuillez à sécher complètement les housses avant de les remettre sur le GoTo.
12. Ne pas repasser les housses et les sangles.
13. Ne pas mettre de produits à base de javel sur le GoTo.

Astuce :

Vous pouvez fabriquer votre propre nettoyant tissu c'est simple et facile à réaliser.

Verser une tasse d'eau tiède dans un dans un bol et ajouter 1/4 d'une tasse de liquide vaisselle biodégradable. Avec un batteur électrique, battre le mélange à vitesse moyenne jusqu'à ce que le liquide devienne une mousse épaisse. Cette mousse enlèvera les accumulations de saleté et la plupart des tâches de nourriture ou de boisson. Ce produit est facile à fabriquer, peu couteux et écologique.

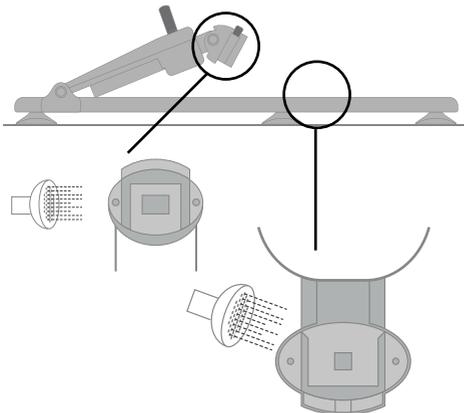

Plateforme à inclinaisons variables

1. Veiller à ce que le dessous de la plateforme soit nettoyé à chaque utilisation.
2. Du savon et de l'eau peuvent être utilisés pour un nettoyage quotidien.
3. N'utilisez pas de solvant pour nettoyer la base.
4. Pour enlever le sable, la terre, l'herbe qui pourraient se loger dans les éléments de fixation entre la plateforme et le siège, tapoter légèrement la zone pour les faire tomber. Rincer abondamment le bras d'inclinaison pour vous assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de particules à l'intérieur. S'il y a des saletés dans le bras d'inclinaison pousser les saletés avec le pouce pour les enlever.
5. Si la plateforme est en contact avec l'eau salée, rincez-la soigneusement à l'eau douce.



Si la plateforme est utilisée en extérieur (à la plage ou dans le jardin) il est important de la rincer après chaque utilisation afin d'enlever toutes les particules qui pourraient obstruer les mécanismes de la plateforme.

CHAPITRE 06: Service après-vente

Pour tous les problèmes liés au service veuillez consulter le site Internet de firefly www.fireflyfriends.com ou contacter le service clients de Firefly à l'adresse mail suivante customer.enquiries@fireflyfriends.com.

CHAPITRE 07: Recommandations principales

Placer votre enfant dans le siège GoTo

1. Le siège GoTo doit toujours être solidement fixé avant de placer un enfant dans le siège
2. La plateforme doit toujours être utilisée sur une surface plane et ferme. Les surfaces molles comme les moquettes ou les tapis (spécialement les tapis à poils longs) peuvent réduire la stabilité de la plateforme. Elle doit donc être utilisée avec prudence.
3. Assurez-vous que les sangles du harnais ne gênent pas le placement de l'enfant dans le siège. Les sangles d'épaules et de maintien latéral doivent être lâches.
4. Si vous placez l'enfant dans un chariot, guider ses jambes doucement à travers les emplacements du chariot, ne pas forcer.

5. Une fois que les jambes sont correctement placées dans le chariot, placez doucement les bras de l'enfant à travers les bretelles du harnais - les bretelles doivent être lâches. S'assurer que le rembourrage des bretelles se situe au niveau des épaules de l'enfant.
6. Fermer la boucle centrale et régler les sangles de maintien latéral pour vous assurer que l'enfant est bien maintenu dans le harnais du siège. La longueur de la sangle d'épaule doit être ajustée pour s'adapter à votre enfant. Voir le chapitre 11 (b) pour plus de détails.
7. La longueur de la sangle d'entrejambe peut être réglée en accédant au raccord de réglage situé sous la partie rembourrée. Pour le siège GoTo taille 2, l'emplacement de la sangle d'entrejambe peut être déplacé dans une encoche située à l'avant de l'assise pour s'adapter à votre enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Voir le chapitre 11 (b) pour plus de détails.

Enlever l'enfant du siège GoTo

1. Desserrer les sangles d'épaules et les sangles latérales de maintien.
2. Déverrouillez la boucle centrale à l'aide du bouton situé sur la boucle du harnais.
3. Faites glisser les bretelles sur les épaules de l'enfant et retirez doucement ses bras du harnais.

4. Pour la taille 1, si votre enfant est placé dans un chariot de supermarché, soulevez-le doucement en guidant délicatement ses jambes hors du chariot.

N'essayez pas de soulever votre enfant hors du chariot pendant qu'il est encore attaché au siège.

CHAPITRE 8. Inspection du produit

Nous vous recommandons de réaliser plusieurs points de contrôle pour permettre une utilisation en toute sécurité du siège GoTo.

La liste des points de contrôle est détaillée ci-dessous

1. Vérifier que le harnais est en place et bien fixé.
2. Vérifier que les protège-harnais au niveau des sangles ne montrent aucun signe d'usure ni de déchirure.
3. Vérifiez que toutes les sangles soient fixées à la structure en plastique du siège GoTo.
4. Vérifier que la structure en plastique du siège GoTo ne présente aucun signe de dommages ou de fissures.
5. Assurez-vous que tous les boutons pression soient bien serrés.

6. S'assurer que le GoTo est bien fixé sur un support avant de positionner l'enfant dans le siège.

7. Si vous utilisez la plateforme à inclinaisons variables assurez-vous que le GoTo est correctement fixé à sa plateforme. Voir chapitre 13 de ce manuel.

Si vous avez un doute sur une l'utilisation en toute sécurité de votre produit Firefly ou si une des pièces est défectueuse, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contacter notre service clients dès que possible.


CHAPITRE 9. Reprise des produits Firefly

S'assurer que le produit a été nettoyé et désinfecté en profondeur conformément au chapitre 5 de ce manuel.

Toujours vérifier qu'un manuel d'utilisation est fourni avec le produit. En cas de doute sur une utilisation en toute sécurité de votre produit Firefly/ Leckey ou si une des pièces, est défectueuse, cessez d'utiliser le produit **et contacter le service clients de Firefly dès que possible : customer.enquiries@fireflyfriends.com.**

CHAPITRE 10: Installation de votre siège GoTo

10(a) Alignement du support de maintien latéral

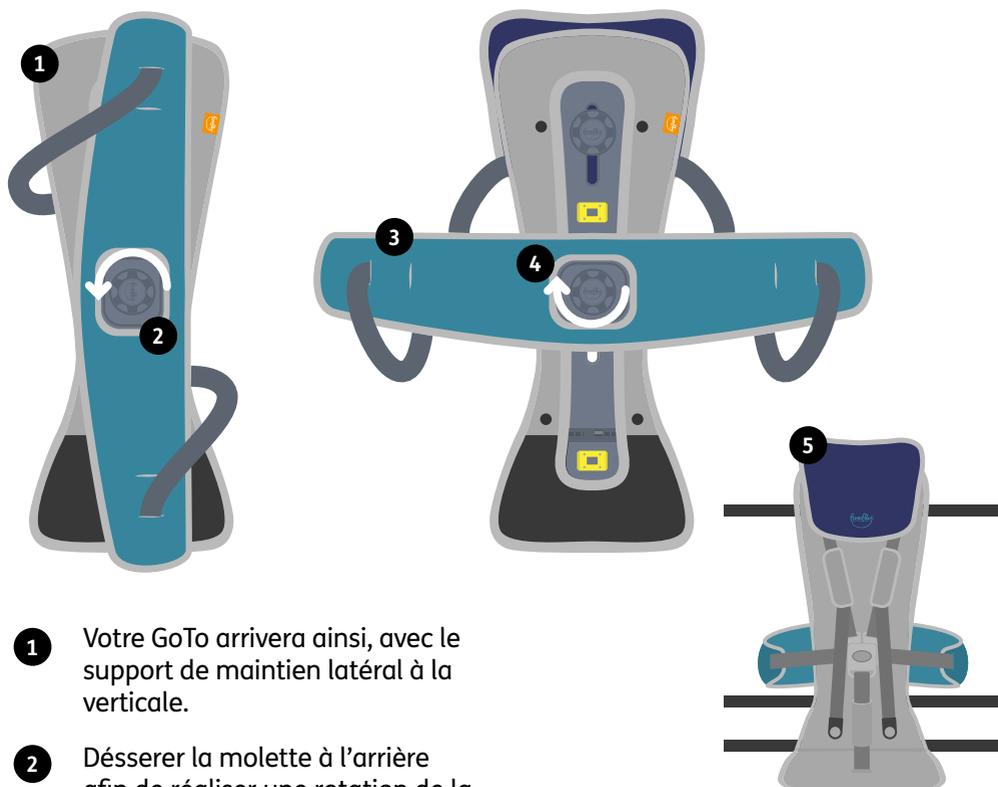


- 1 Votre GoTo arrivera ainsi, avec le support de maintien latéral à la verticale.
- 2 Desserer la molette à l'arrière afin de réaliser une rotation de la ceinture de maintien latéral.
- 3 Tourner la ceinture de maintien latéral le sens inverse des aiguilles d'une montre et la mettre en position horizontale.
- 4 Vérifier que la ceinture de maintien latéral est bien positionnée au niveau de la partie centrale du dossier et serrez la molette à fond.


- 5 Retournez votre siège GoTo et clippez la ceinture de maintien latéral dans la boucle centrale du harnais. Voir le chapitre 11 (b) de ce manuel. Vérifiez que les sangles de la ceinture de maintien latéral soient bien clipées et que l'ensemble des autres sangles soient correctement fixées, voir le schéma ci-dessus.

10(b) Installation de la plateforme à inclinaisons variables Floorsitter. (Si vous l'achetez avec le siège GoTo).

La plateforme à inclinaisons variables Floorsitter doit être placée sur une surface ferme, solide et statique. Lors de l'installation de la plateforme Floorsitter à l'endroit de votre choix, il est important que les pieds en caoutchouc soient en contact avec le sol.

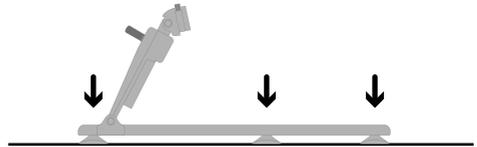


Une fois la plateforme en place, veillez à ce que le bras d'inclinaison soit réglé sur la position la plus haute.

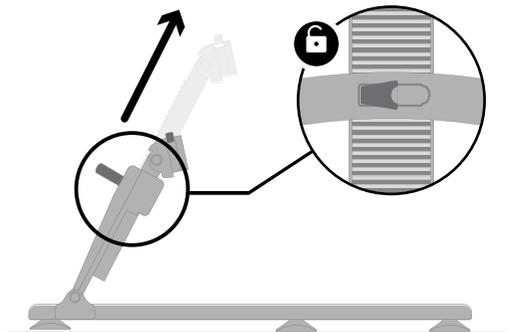


Section 11: Utilisation du siège GoTo sur une chaise avec un dossier rigide


11(a) Fixer le GoTo sur une chaise avec dossier rigide

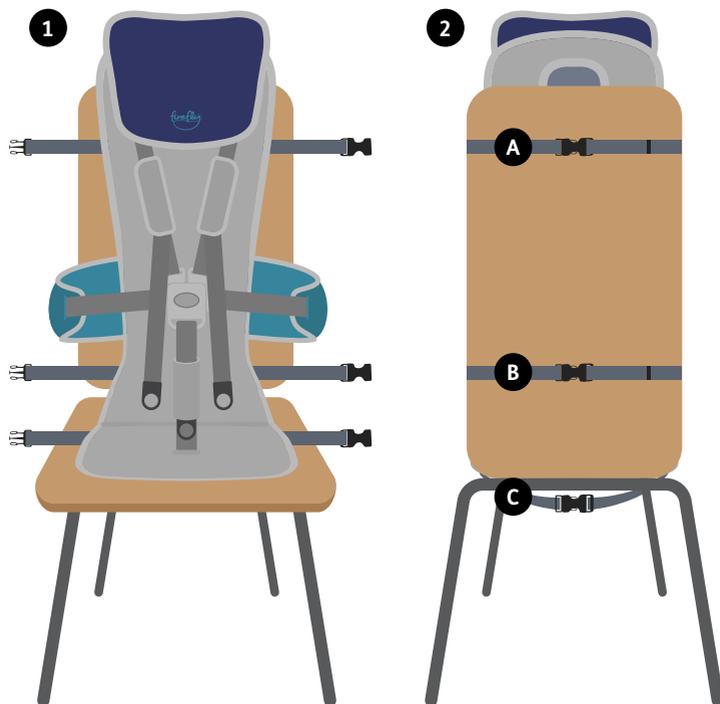


- 1 Bien s'assurer que toutes les sangles soient desserrées et détachées les unes des autres. Ensuite placer le siège GoTo sur une chaise avec dossier rigide.
- 2 Attacher les sangles **A** fermement autour du dossier, idem pour les sangles **B**. Attacher les sangles **C** sous le siège de la chaise.

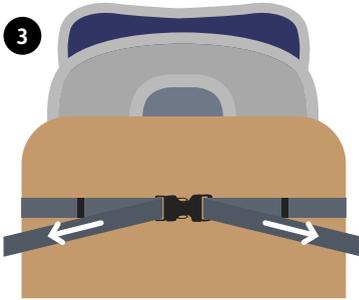

3
Tirez les sangles vers l'extérieur pour serrer.

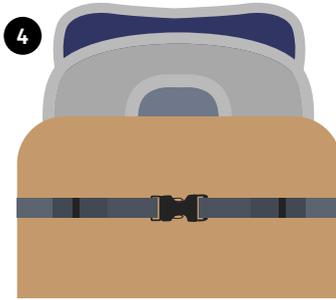

4
Passez l'excès de sangle dans les passants et fixez-les.

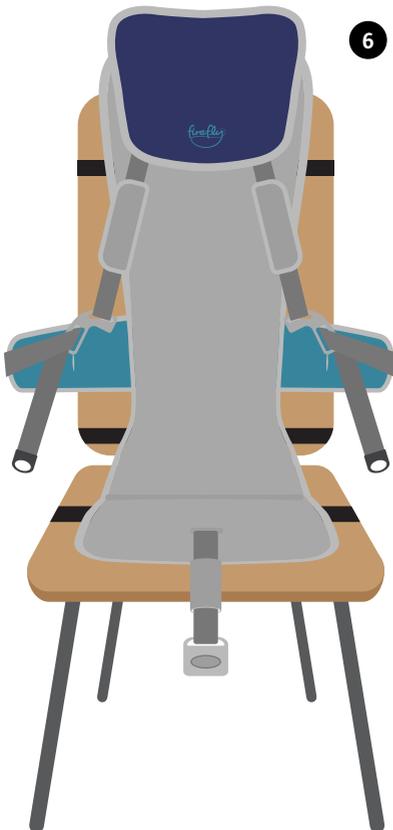



6

S'assurer que toutes les sangles noires soient bien fixées au dossier rigide et que le harnais 5 points soit détaché avant de placé l'enfant dans le siège GoTo.

11(b) Ouvrir et fermer le harnais 5 points

Avant de commencer, s'assurer que la ceinture de maintien latéral, la sangle d'entrejambe, et les sangles d'épaules soient toutes desserrées et détachées.

- 1 Attacher les deux supports latéraux de chaque côté de la boucle centrale.
- 2 Une fois attachées, ajuster les sangles d'épaules, les sangles de maintien latéral et la sangle d'entrejambe en tirant sur les boucles pour les ajuster.

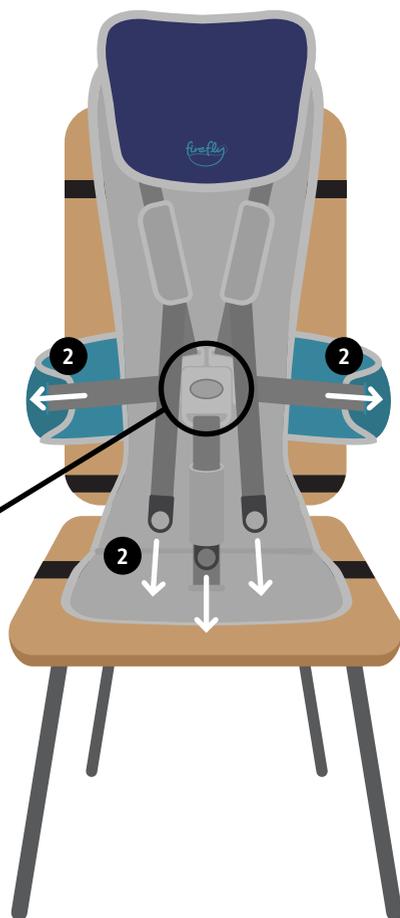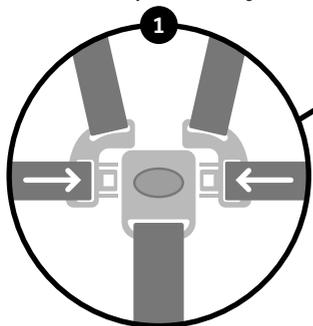


Assurez-vous que les sangles ne soient pas vrillées et que la boucle du harnais soit fermée.

3

Pour la taille 2, la sangle d'entrejambe peut être fixée à deux endroits différents (une position sur l'avant du siège et une position plus vers l'arrière) en fonction des besoins de l'enfant. La sangle doit être fermement fixée à la base en plastique du siège GoTo.


Enfants plus petits

Enfants plus grands

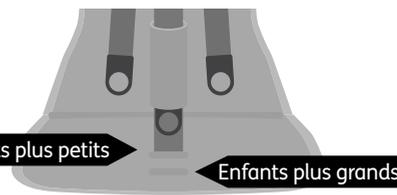

11(c) Ajustement de l'appui-tête et du support de maintien latéral

- 1** Dévisser la molette de l'appui-tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer de la structure du siège GoTo. Faites glisser l'appui-tête vers le haut ou vers le bas pour obtenir la position souhaitée.
- 2** Une fois la hauteur de l'appui-tête réglée, visser la molette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3** Pour desserrer le support latéral, tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Déplacez le support latéral vers le haut ou vers le bas pour obtenir la position souhaitée. Une fois la position souhaitée obtenue, visser la molette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser son positionnement.

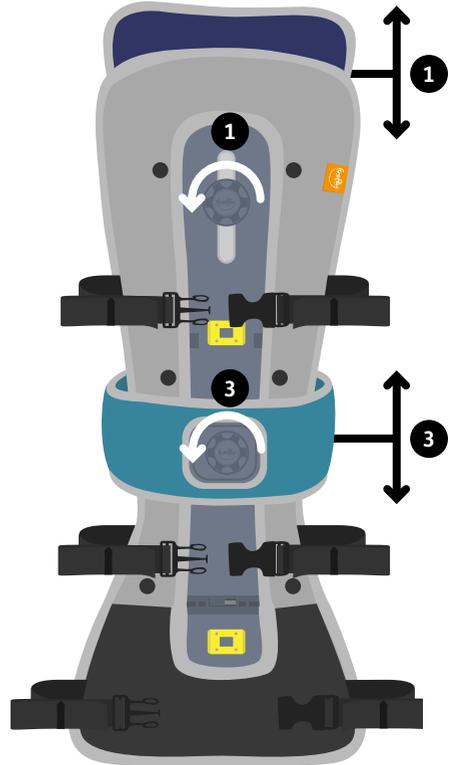


Chapitre 12 : Utiliser le GoTo dans un chariot de supermarché

- 1 Assurez-vous que toutes les sangles soient desserrées et détachées. Placez GoTo dans le siège du chariot. Enfiler les sangles **A** à travers la grille du siège du chariot et attachez-les. Tirer sur les sangles pour les serrer.
- 2 Enfiler les sangles **B** à travers la boucle du siège du chariot, les attacher ensemble et les serrer.



S'il n'y a pas de boucle sur le siège du chariot, attacher les sangles B au même endroit que les sangles A.

- 3 Attachez les sangles **C** en dessous du siège du chariot et tirer sur les sangles pour les serrer. Boucler les sangles.
- 4 Vérifier que le harnais 5 points est ouvert et que les sangles soient desserrées avant de placer l'enfant dans le siège.

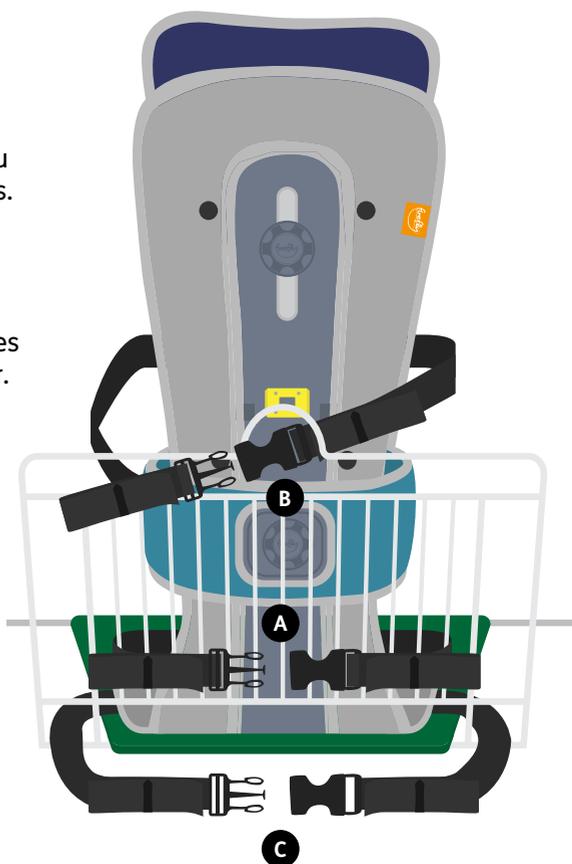


Chapitre 13 : Attacher le siège GoTo à la plateforme à inclinaisons variables Floorsitter (en option)




Avant d'attacher le siège GoTo à sa plateforme Floorsitter suivre les étapes du chapitre 10(b).

- 1 Installer à plat la base du siège du GoTo sur la plateforme Floorsitter.

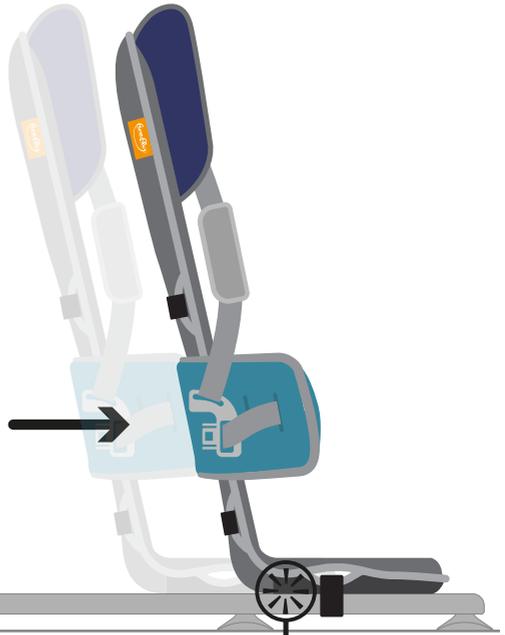


- 2 S'assurer que la base de l'assise est alignée avec le dispositif de fixation de la plateforme. Puis, faites glisser la base de l'assise vers l'avant de façon à ce que l'encoche située sous l'assise se glisse dans le canal de verrouillage de la plateforme.

- 3 Quand la base du siège du Goto est verrouillée vous devez entendre un "clic" caractéristique ce qui signifie que la base du Goto est bien enclenchée dans sa plateforme.

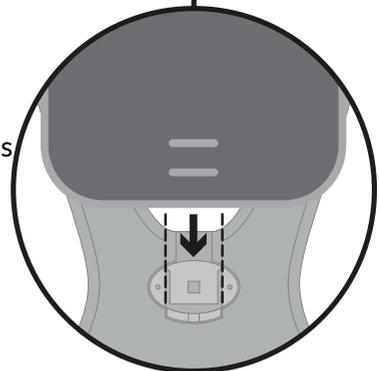

Chapitre 13: Attacher le siège GoTo à la plateforme à inclinaisons variables Floorsitter (en option) suite

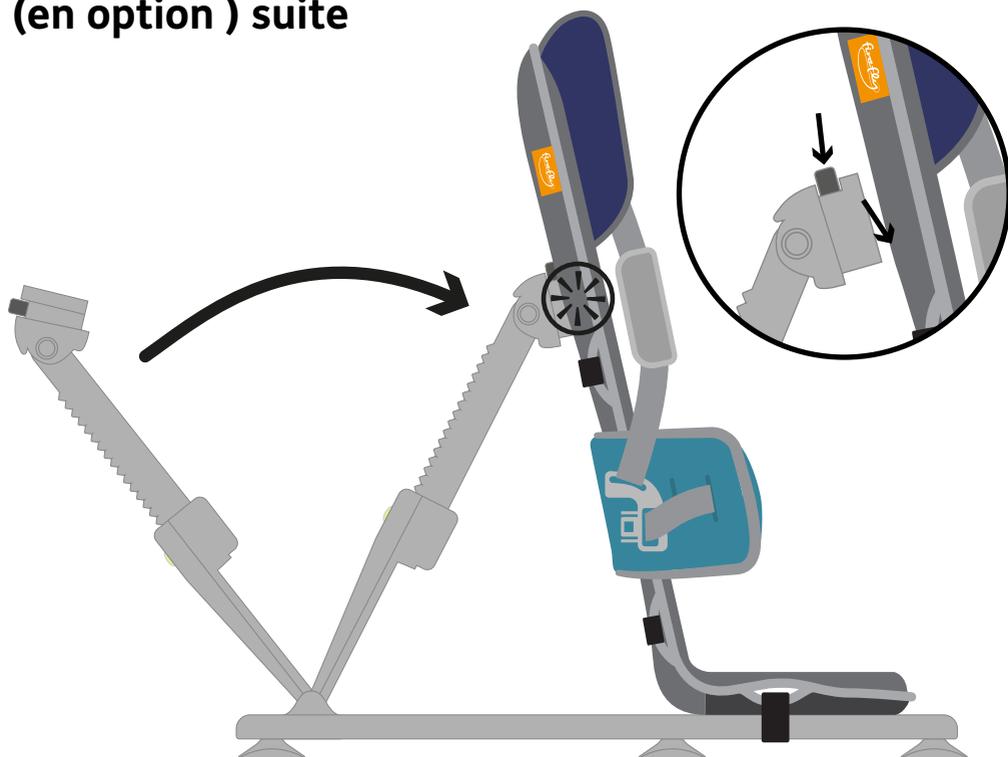

Avant de fixer le bras d'inclinaison assurez-vous qu'il est ajusté au plus haut.

Avec une main, tenez le GoTo puis avec l'autre main pressez le bouton jaune puis l'insérer dans la fente.

Une fois assemblé correctement, vous devez entendre un "clac" caractéristique.



Si vous entendez un "clac" sonore cela signifie que l'assise et le dossier du GoTo sont correctement engagés dans la plateforme

Chapitre 14: Positions d'inclinaisons recommandées


Inclinaison verticale – Si votre enfant tolère la position assise et possède un bon contrôle du tronc, il est possible d'utiliser une inclinaison verticale.



Inclinaison intermédiaire – Nous recommandons de placer le GoTo dans une position intermédiaire d'inclinaison si l'enfant a besoin d'être relevé dans dans son siège.



Inclinaison maximum du siège – nous recommandons de placer GoTo dans la position d'inclinaison maximum pour les enfants ayant un maintien de la tête limité.

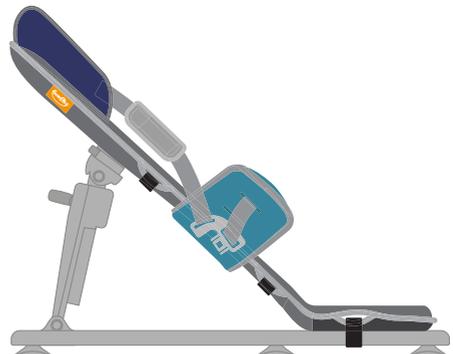


14(a) Utiliser la fonction d'inclinaison du Floorsitter

Une fois que votre enfant est complètement sécurisé et installé la fonction d'inclinaison peut être utilisée.


Soyez prudent lorsque vous utilisez l'angle d'inclinaison. Il est important de réaliser en douceur le mouvement d'inclinaison pour ne pas stresser l'enfant.

Pour positionner le GoTo dans une position verticale, placer une main sur le GoTo **A** sur la partie supérieure du dossier pour prendre appui et l'autre main sur le clip jaune pour incliner le bras de levier d'inclinaison du Floorsitter. **B**

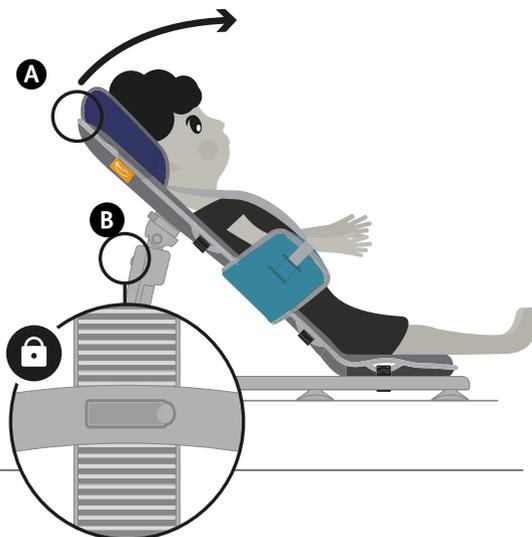


Déverrouiller le clip **A** et positionner le GoTo à la verticale dans une position qui convient à votre enfant.


Fixer ensuite le clip sur le Floorsitter. Vous entendrez un "clac", cela signifie que celui-ci est verrouillé.

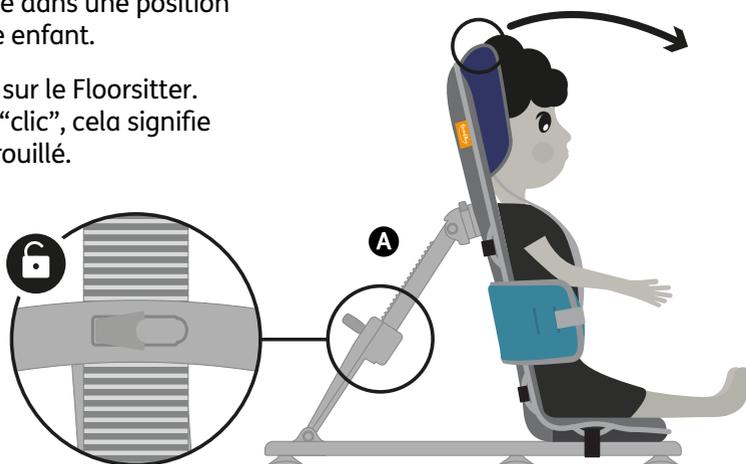

14(b) Enlever le GoTo de plateforme Floorsitter

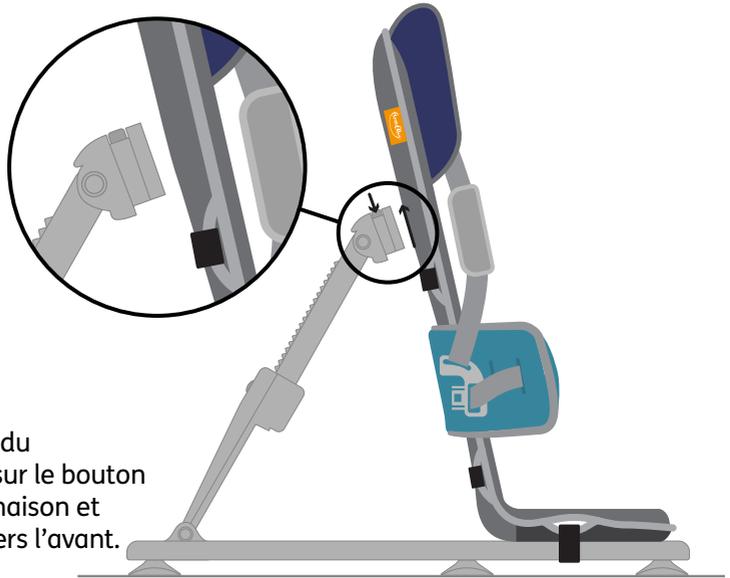


Pour enlever le GoTo du Floorsitter, appuyer sur le bouton jaune du bras d'inclinaison et basculer le dossier vers l'avant.

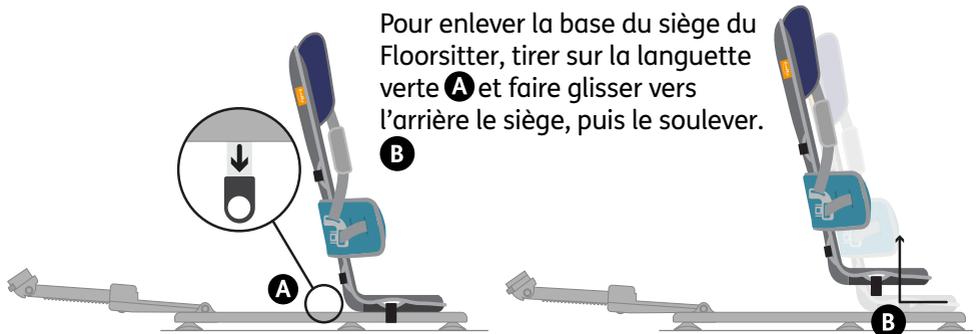

Pour enlever la base du siège du Floorsitter, tirer sur la languette verte **A** et faire glisser vers l'arrière le siège, puis le soulever.

Pour retirer la plateforme Floorsitter de la surface d'appui, soulever légèrement la plateforme pour décoller les ventouses. Si les ventouses ne se décollent pas au premier essai, refaire l'opération sans trop forcer. Placer votre main sous les ventouses pour les décoller (ne pas utiliser d'outils).

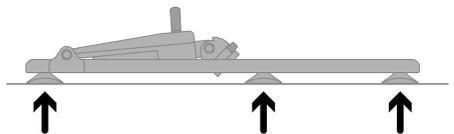


Chapitre 15: Démontez le GoTo et enlever les housses

15(a) Appui-tête

- 1 Dévisser la molette au niveau de l'appui-tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.



- 2 Revisser la molette à l'arrière de l'appui-tête pour être sûr de ne pas la perdre.
- 3 Déclipser les boutons-pression de chaque côté de l'appui-tête.
- 4 Faites glisser la housse de l'appui-tête sur la base en plastique pour la retirer.

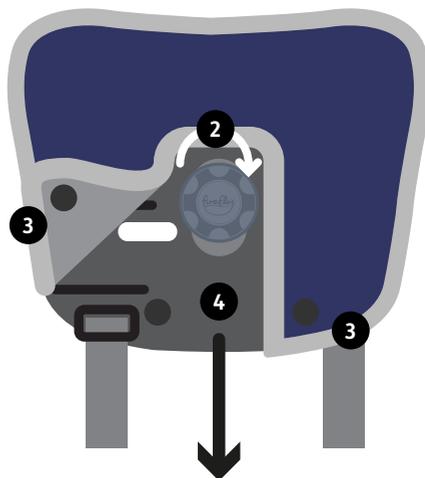


- 5 Puis détacher complètement l'appui-tête de la base du GoTo en retirant les boucles des sangles d'épaule de l'appui-tête.



15(b) Supports latéraux

Commencer par détacher les sangles noires comme illustré ci-contre


- 1 Tourner le siège GoTo et détacher les supports latéraux en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Faites glisser le support latéral vers le haut, au-dessus du dossier du GoTo. Revisser la molette sur son support fixation afin d'éviter de la perdre ou de mal la placer.
- 3 Retournez le siège GoTo et poser le support latéral sur le devant du GoTo.

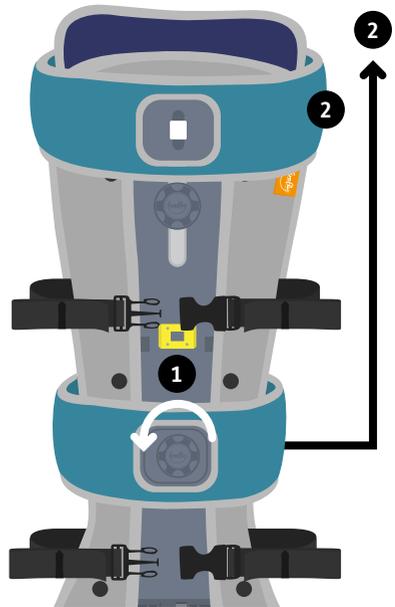

- 4 Desserrer autant que possible les sangles latérales de maintien. **mais garder la boucle attachée.**
- 5 Retirer un côté de l'insert en plastique de la housse.

Retirez la sangle en faisant passer la boucle en plastique à travers les trous de l'insert en plastique puis à travers le rembourrage.

Répéter la même opération pour l'autre côté du support latéral. Une fois enlevé du support latéral en plastique, votre housse est prête à être lavée.

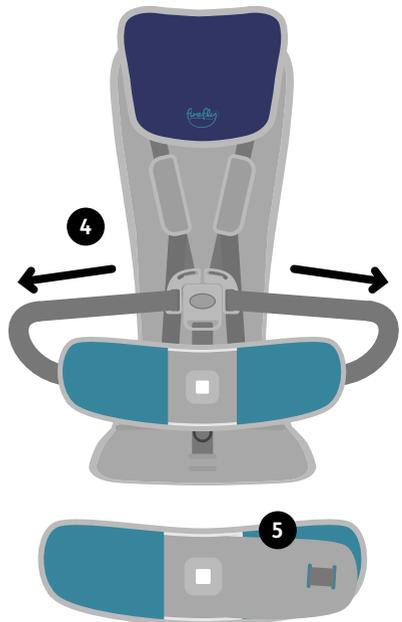

15(c) Sangles

1

Passez les sangles du siège GoTo à travers les fentes des housses et de la structure en plastique du GoTo.




Clipper les sangles par paire et les mettre de côté dans un endroit sûr.

Rappelez-vous que les sangles **A** sont plus longues et doivent être attachées à l'arrière dans la housse du siège uniquement. Les sangles **A** ont une étiquette d'avertissement différente qui peut être utilisée pour les identifier.


2

Comme les sangles ci-dessus, faites passer la sangle d'entrejambe à travers la fente puis la housse de l'assise.

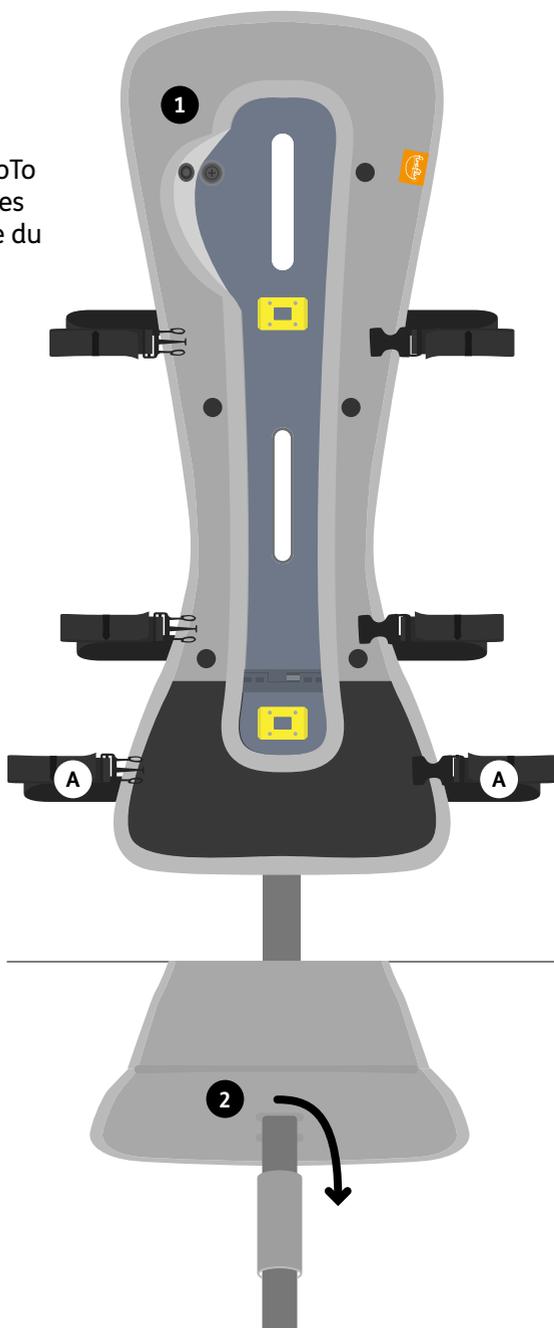

15(d) Housses

- 3** Retirer la structure rigide du rembourrage. Pour le GoTo taille 1, détacher le velcro à la base du siège pour retirer la structure rigide.

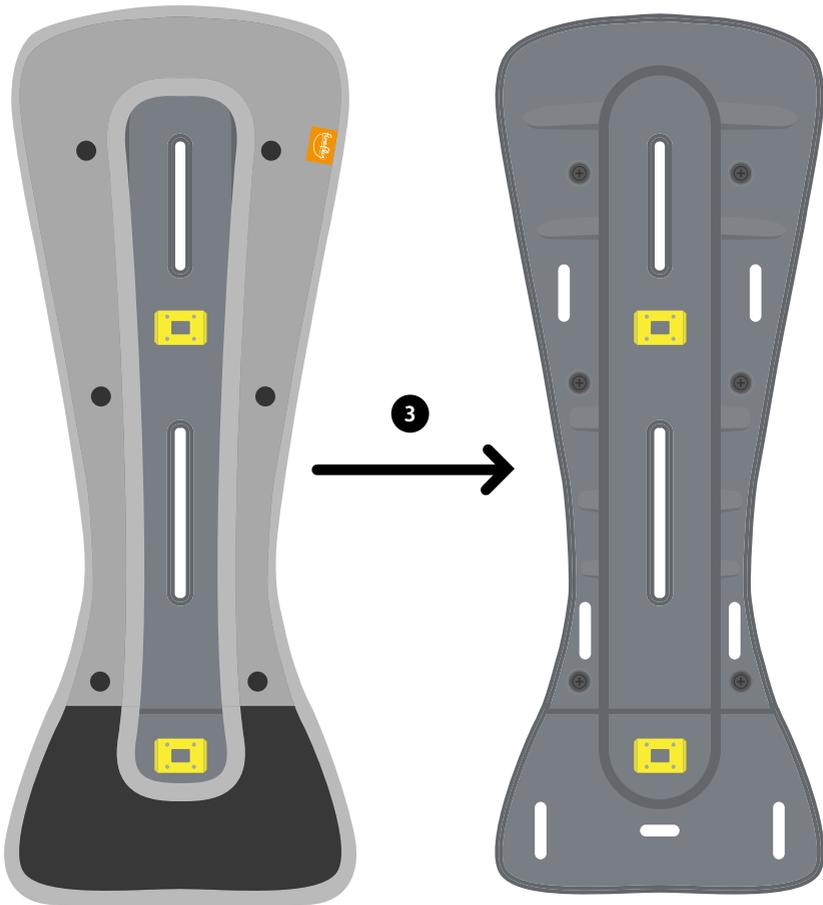


Chapitre 16: Remettre la housse


Montage et démontage du GoTo

16(a) sangles & housse

- 1 Récupérer les sangles du siège du GoTo, les sangles **B** et **C** vont sur le dossier et à la base du GoTo et les sangles **A** (les plus longues) vont sur l'assise du GoTo.
- 2 Enfilez la boucle de chaque sangles noires (pas la fixation) à travers les fentes de la housse dans un premiers temps puis à travers la structure du GoTo.
- 3 Comme pour les sangles ci-dessus enfilez la sangle d'entrejambe à travers la housse de l'assise puis à travers la structure en plastique.

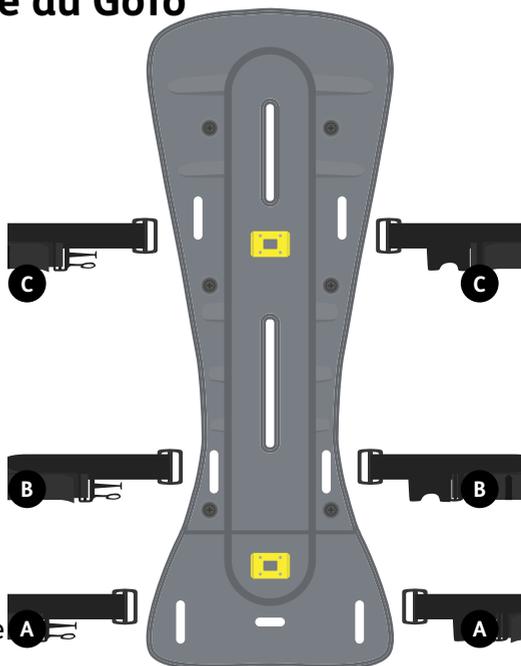

- 4 Une fois que toutes les sangles sont insérées, placez la structure dans sa housse.

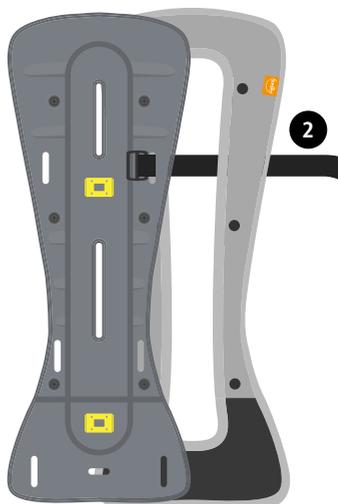

Glisser d'abord la partie la plus large de la base du siège GoTo dans sa housse. Pour la taille 1, ouvrir au préalable le velcro de l'assise du siège.

16(b) Support latéral








Avant de commencer, repérer la sangle qui s'installe du côté droit et la sangle qui s'installe du côté gauche.

- 1 Desserer au maximum au niveau de la boucle les sangles du support latéral. Alignez la housse, le support latéral et les sangles comme sur le schéma ci-contre.
- 2 Insérez la sangle dans la housse du support latéral.
- 3 Passer la sangle à travers la housse.



Enfiler la boucle à travers la fente intérieure de la housse pour les enfants plus petits.




- 4 Enfiler la sangle à travers la fente du support latéral en prenant soin de laisser la boucle à l'extérieur du support latéral pour éviter toute irritation pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser un autre passage de sangle pour modifier la largeur du support latéral et l'adapter à votre enfant.
- 5 Placer le support en plastique dans sa housse et tirer sur les sangles pour insérer le support dans sa housse.

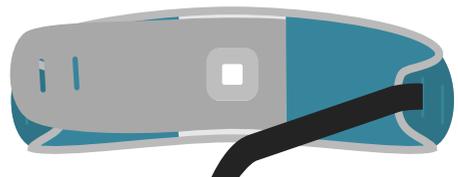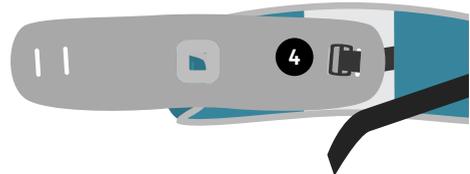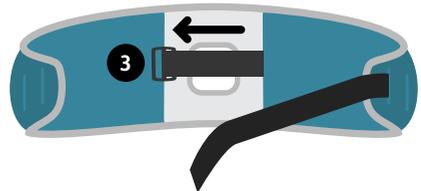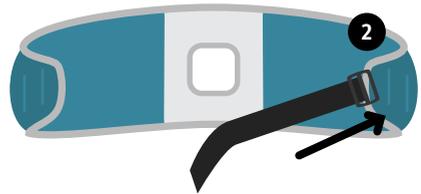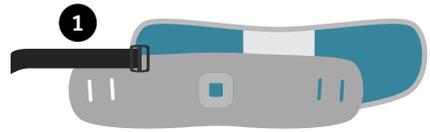

Faites de même pour le côté opposé.

16(c) Appui-tête


- 1 Insérer les boucles des sangles d'épaule directement à travers les fentes de la structure de l'appui-tête.
- 2 Faites glisser la housse de l'appui-tête sur la structure en plastique et fixer les boutons-pression.
- 3 Fixer l'appui-tête sur la base du GoTo en alignant la fente avec le support de vis. Fixer la molette en la tournant le sens des aiguilles d'une montre.

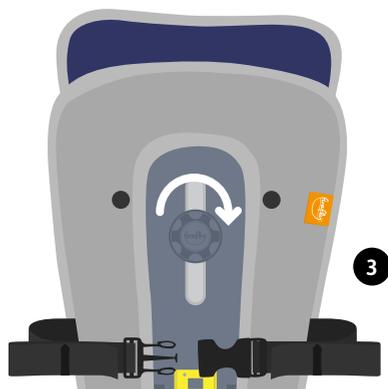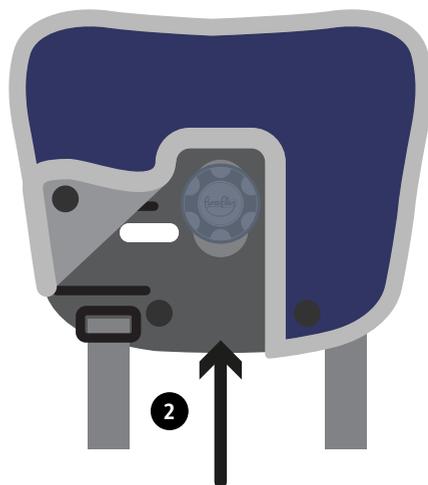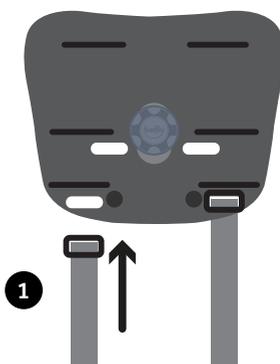

Chapitre 17: Tableau des tailles

	Taille 1	Taille 2
Hauteur max assise -appui-tête (mm)	540	680
Hauteur mini assise -appui-tête (mm)	380	510
Hauteur max de la ceinture (mm)	260	300
Hauteur min de la ceinture (mm)	190	210
profondeur du siège (mm)	157	244
Poids max (kg)	15*	30*
Tranche d'âge (approximative)	1-3 ans	3-8 ans

* (si l'enfant pèse plus de 13 kg le GoTo ne peut pas être utilisé dans un chariot)

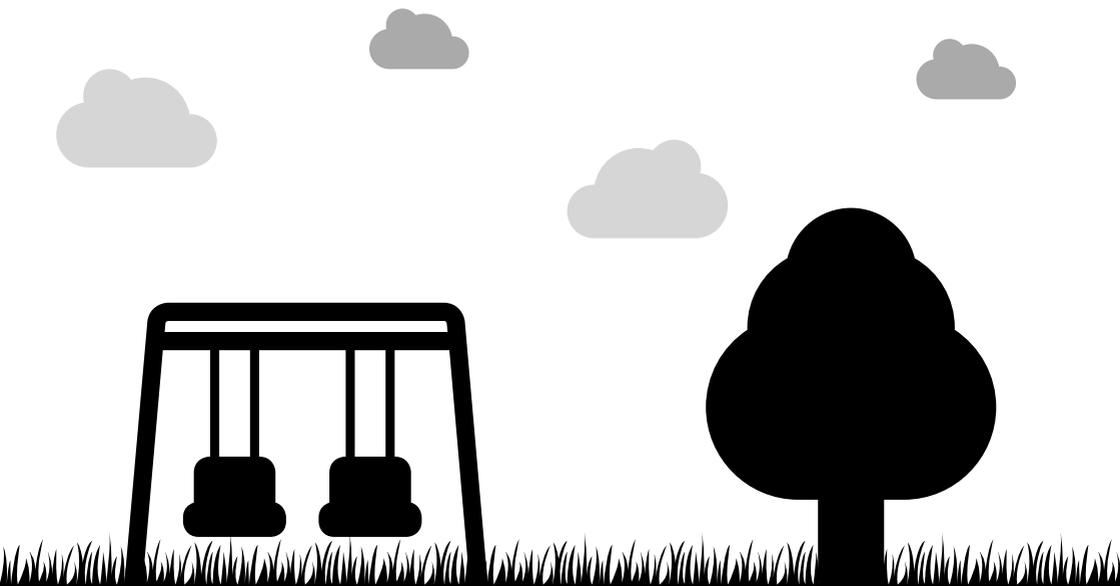

Firefly by Leckey,
19c Ballinderry Road,
Lisburn,
Northern Ireland,
BT28 2SA

UK 0800 318 265

www.fireflyfriends.com



LS604-01