

splashy

Manuel d'utilisation

Pour prendre le bain, jouer
et se détendre

Veillez lire attentivement toutes les instructions du manuel d'utilisation avant d'utiliser le Splashy. Ces instructions peuvent être téléchargées à partir de notre site Internet **www.fireflyfriends.com**. Vous pouvez consulter des vidéos, des schémas et télécharger des documents contenant des informations pratiques.

Sommaire

| | |
|--|------|
| 01 Usages prévus | p.3 |
| 02 Déclaration de conformité | p.4 |
| 03 Conditions de la garantie | p.4 |
| 04 Consignes de sécurité | p.5 |
| 05 Consignes de nettoyage et d'entretien | p.6 |
| 06 Vérification et entretien du produit | p.8 |
| 07 Informations importantes | p.8 |
| 08 Reprise des produits Firefly | p.9 |
| 09 Instructions d'utilisation | p.10 |
| 10 Guide des tailles | p.29 |

Chapitre 1 : Usages prévus

Le Splashy est un siège de bain destiné aux enfants en situation de handicap qui permet un soutien de la tête et du tronc lors du bain. **Par mesure de sécurité, et pour garantir la stabilité et le bon maintien du Splashy, il est important que celui-ci soit attaché à la plateforme Floorsitter à chaque utilisation.**

Splashy est conçu pour les enfants âgés approximativement de 1 à 8 ans avec un poids maximum de 30 kg.

Le Splashy se compose de 3 parties principales : le dossier, le siège de bain, et une plateforme Floorsitter. Vous recevrez un pack de maintien incluant un harnais 5 points et 4 cales-tronc que vous pouvez disposer n'importe où sur le siège ou un soutien est nécessaire (appui-tête, plot d'abduction...).

Le dossier, l'assise, et la plateforme Floorsitter sont conçus pour s'assembler ensemble facilement en toute sécurité - voir le chapitre 9 du manuel pour de plus amples précisions.



Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans le siège de bain Splashy. A chaque instant, il y a un risque de blessures ou de noyade.

Nous recommandons qu'un adulte effectue une inspection approfondie du produit conformément au chapitre 6 du manuel d'utilisation afin d'utiliser

le Splashy en toute sécurité. Firefly Friends Ltd. et James Leckey Design Ltd. déclinent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors des usages prévus. En cas de doutes, merci de contacter le service clients de Firefly au Royaume Uni au 0800 318265 ou en Irlande au 1800 626020.

Les activités quotidiennes testées et approuvées par Firefly Friends Ltd et James Leckey Design Ltd sont l'utilisation du Splashy :

1. Dans le bain ou la douche
2. Pour des jeux et activités aquatiques

Les conditions d'utilisation du Splashy en dehors du contexte de la salle de bain (comme la plage ou le jardin) doivent être évaluées à l'avance. Soyez conscient que le système de fixation qui relie le siège à la plateforme floorsitter (plateforme de maintien au sol) peut être obstrué par des petites particules telles que de la terre, du sable ou de l'herbe. Si le Splashy est en contact avec un de ces éléments qui pourraient affecter le bon fonctionnement de ses fixations (entre le siège et la plateforme Floorsitter) assurez-vous de bien le rincer après utilisation. Veuillez-vous référer au chapitre 4 pour prendre connaissance des consignes de sécurité et du chapitre 5 pour des conseils supplémentaires sur le nettoyage et le soin.

CHAPITRE 2 : Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en tant que fabricant responsable de la marque Firefly, déclare que Splashy est conforme aux exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC. Le Splashy répond aux exigences de la norme CE comme dispositif médical de classe 1.

CHAPITRE 3 : Conditions de la garantie

La garantie pour le Splashy s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément aux spécifications et aux usages prévus par le fabricant. Le produit est garanti 1 an par le fabricant du produit James Leckey Design Ltd.

Les produits sont garantis 12 mois, dans ce cadre vous pouvez nous les retourner pour procéder à une réparation ou à un échange. Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour récupérer le produit et procéder à son remplacement ou sa réparation. A réception de la marchandise le fabricant James Leckey Design Ltd. retournera le produit sous un délai de 14 jours au distributeur qui vous le fera parvenir.

Dans tous les cas, il incombe aux clients de s'assurer que le produit est convenablement emballé, de préférence dans son emballage d'origine.

CHAPITRE 4 : Consignes de sécurité

1. Toujours lire le manuel d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
2. L'enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant l'utilisation du produit.
3. Si vous utilisez le Splashy à la plage ne jamais laisser votre enfant sans surveillance près de la mer.
4. Vérifier avant son utilisation, que tous les composants du Splashy soient solidement assemblés conformément aux instructions de cette notice. Le Splashy doit toujours être fixé à la plateforme Floorsitter (plateforme de maintien au sol) sur une surface plane, stable et solide. Ne jamais le placer sur une surface inclinée.
5. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg. Ne jamais dépasser ce poids.
6. Le Splashy contient des pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Vérifier que tous les composants sont solidement fixés avant son utilisation y compris les sangles et les boutons à bascule.
7. Ne jamais modifier le Splashy ou l'utiliser avec d'autres composants que ceux homologués par Firefly. Cela pourrait mettre en danger votre enfant et invalider la garantie.
8. Quand vous utilisez le Splashy sur de l'herbe, de la terre, du sable ou sur une surface composée de petits éléments assurez-vous de toujours bien le nettoyer pour éviter toute obstruction des fixations pour reconnecter le siège et la plateforme Floorsitter. Reportez-vous au chapitre 9.2.6.
9. Après utilisation, sécher soigneusement le Splashy avant de le stocker avec précaution. Le Splashy doit toujours être tenu à l'écart de toutes sources de chaleur directe y compris les flammes, les cigarettes et les radiateurs électriques ou à gaz.
10. Nettoyer le Splashy régulièrement conformément au chapitre 5 du manuel.
11. Effectuer des contrôles réguliers et complets pour s'assurer du bon fonctionnement de votre produit. le Splashy ne doit pas être utilisé si des pièces sont défectueuses.
12. Si vous avez des doutes sur une utilisation en toute sécurité du Splashy ou si des pièces sont défectueuses, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clients de Firefly au Royaume Uni au 0800 318265 ou en Irlande au 1800 626020.
13. Tous les articles promotionnels fournis avec le Splashy ne doivent pas être utilisés sans surveillance.



Si vous ne respectez pas ces instructions, cela peut mettre votre enfant et vous même en danger.

CHAPITRE 5 : Consignes de nettoyage et d'entretien

Comment entretenir votre Splashy

- Lors du nettoyage du Splashy, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif. N'utilisez jamais de solvants organiques ou de liquides de nettoyage à sec.
- Ne pas laver à la machine ou nettoyer à la vapeur les composants en mousse du Splashy. Il y a un risque de déformation de ces composants.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de lotions médicamenteuses dans l'eau du bain cela pourrait engendrer une détérioration des matériaux qui composent le Splashy.
- Nettoyer et essuyer les résidus et saletés dans le fond de la baignoire avant de fixer la plateforme Floorsitter et assurer une bonne adhérence des ventouses à la baignoire.
- Pour enlever les résidus de sable, de terre ou d'herbe qui peuvent se mettre dans les fixations entre le siège et la plateforme, procéder à de légers tapotements de la zone pour faciliter l'enlèvement de ces particules. Rincer l'ensemble pour chasser les particules des fixations. Actionner le verouillage des boucles pour chasser les saletés.
- Si votre siège de bain est en contact avec de l'eau salée, rincez-le abondamment à l'eau claire et froide.

Le Harnais 5 points

Le harnais 5 points du Splashy peut s'enlever pour être nettoyé séparément avec de l'eau savonneuse.

Floorsitter plateforme de maintien au sol


1. S'assurer que les ventouses situées en dessous de la plateforme Floorsitter soient nettoyées après chaque utilisation pour conserver une bonne adhérence à la baignoire.
 2. Utiliser du savon et de l'eau pour le nettoyer quotidiennement.
 3. Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer la plateforme Floorsitter.
-

Dossier, assise et cales-tronc en mousse du Splashy


1. Utiliser du savon et de l'eau pour le nettoyer quotidiennement.
2. Les revêtements en mousse EVA peuvent être enlevés et lavés régulièrement pour éviter une accumulation de résidus et de saletés.

Les housses en mousse EVA du Splashy peuvent être enlevées et lavées tous les mois.


1. Les housses en mousse EVA sont fixées par 8 crochets : 2 crochets sur le dossier et 6 crochets sur l'assise.
2. Détacher à la main les 8 crochets (ne pas utiliser d'outils).
3. Laver avec de l'eau savonneuse.
4. S'assurer que la housse soit complètement sèche avant de la fixer à nouveau.
5. Assurez-vous que tous les crochets soient verrouillés en remettant la housse en place.

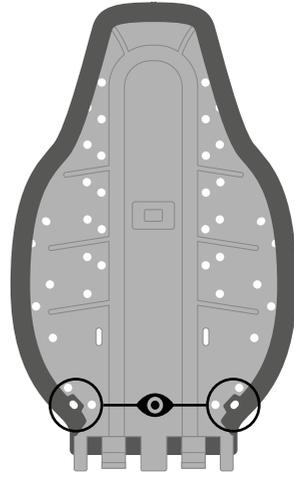

Crochets de fixations

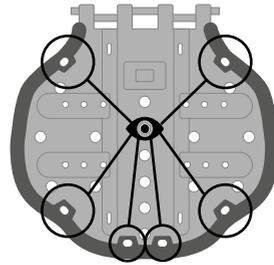

 Si le Splashy est utilisé dans un autre contexte que la salle de bain (sur du sable ou dans le jardin par exemple), il est important de le rincer après chaque utilisation afin d'enlever l'ensemble des particules qui pourraient affecter les systèmes de fixation. Pour fixer le siège sur la plateforme référez-vous au chapitre 9.2.6.

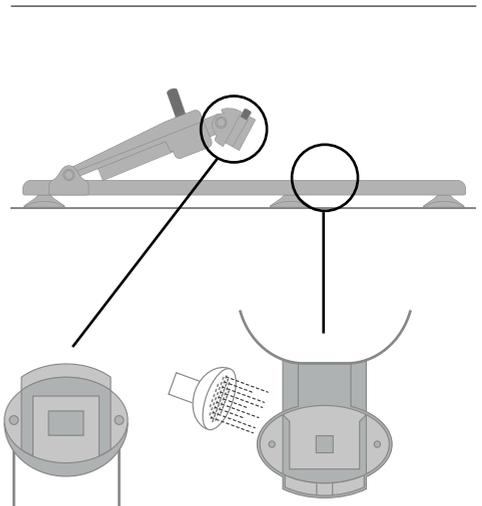

CHAPITRE 6: Vérification et entretien du produit

Nous vous recommandons d'effectuer divers contrôles du Splashy avant utilisation pour s'assurer que le produit est sûr.

Il est recommandé de réaliser les divers contrôles listés ci-dessous :

1. Assurez-vous, que le dossier du Splashy et l'assise du siège sont solidement assemblés, comme détaillé au chapitre 9 de ce manuel.
2. Vérifier que le Splashy est stable et solidement fixé à la plateforme Floorsitter dans le bain avant d'y placer l'enfant.
3. Assurez-vous que le harnais 5 points et les cales-tronc sont solidement fixés au Splashy à l'aide des boutons fermoir.
4. Vérifier que le harnais 5 points et les cales-tronc ne présentent aucun signe d'usure ou de déchirure.
5. Vérifier que les boucles et boutons fermoir ne présentent pas de fissures ou de dommages.



Si vous avez des doutes sur l'utilisation de votre produit Firefly ou si des pièces sont défectueuses, cessez immédiatement de d'utiliser le produit et contacter le service clients de Firefly le plus rapidement.

Pour toutes demandes relatives à nos produits vous pouvez consulter notre site internet : www.fireflyfriends.com ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante : customer.enquiries@fireflyfriends.com.

CHAPITRE 7 : Informations importantes

Vérifier que le Splashy est correctement installé dans le bain. Incliner le dossier dans une position intermédiaire pour assister votre enfant dans son transfère ou installer votre enfant. Vous pouvez vous référer au chapitre 9.5.

Une inclinaison complète permet d'installer l'enfant dans le bain. Cela facilite les transferts dans le Splashy.

Nous vous conseillons d'effectuer les réglages du harnais 5 points et le placement des cales-tronc avant de placer votre enfant dans le siège. Mais vous pouvez les ajuster si nécessaire une fois que votre enfant est placé dans le Splashy. Surveiller attentivement votre enfant si des modifications sont apportées au Splashy.

Lever et porter votre enfant à l'intérieur ou l'extérieur de bain pourrait vous causer des problèmes de dos. Il est recommandé **de demander conseil à votre thérapeute** pour porter et transférer votre enfant en toute sécurité dans le bain et à l'extérieur du bain.

CHAPITRE 8 : Reprise des produits Firefly

Assurez-vous que le produit est correctement nettoyé conformément au chapitre 5 de ce manuel. Vérifier qu'une copie du manuel d'utilisation est fournie avec le produit.






Si vous avez des doutes sur l'utilisation en toute sécurité du produit ou si des pièces sont endommagées, cessez d'utiliser le produit et contacter le service clients de Firefly au Royaume Uni au 0800 318265 ou en Irlande au 1800 626020.

CHAPITRE 9: Instructions d'utilisation

9.1 Composition du Splashy



La canard Splashy doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

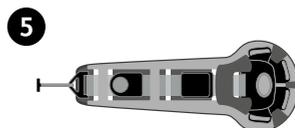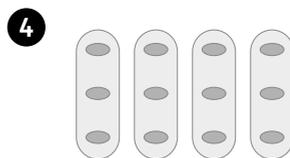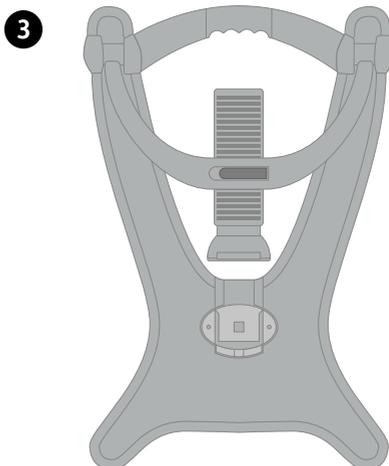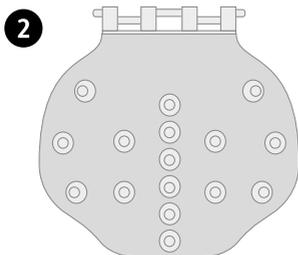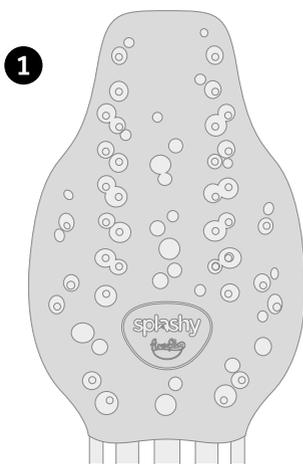

Votre Splashy est composé des parties suivantes :


- 1 1x Dossier
- 2 1x Assise
- 3 1x plateforme Floorsitter
- 4 4x Cales tronc
- 5 1x sangle plevienne & 4x sangles de harnais

9.2 Assembler votre Splashy

- Nous vous recommandons fortement de réaliser un essai de votre Splashy avant de l'utiliser dans le bain en habillant votre enfant de vêtements légers afin de placer correctement le harnais et les cales-tronc.
- Assurez-vous que votre baignoire est propre, sans aucun résidu avant de placer le Floorsitter dans la baignoire.
- Le Splashy **DOIT** être assemblé **AVANT** de remplir d'eau la baignoire. Nous vous recommandons de remplir le bain avec une eau tiède pour éviter d'endommager le Splashy.
- Voir le chapitre 9.5 pour positionner correctement le bras d'inclinaison sur le Splashy.

9.2.1 Placement de la plateforme Floorsitter


La plateforme Floorsitter doit toujours être placée sur une surface dure, solide et plane. Lorsque vous placez la plateforme Floorsitter sur la surface choisie, il est essentiel que les pieds en caoutchouc soient en contact avec cette surface.

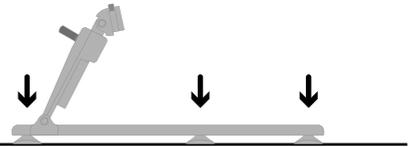

Les ventouses en caoutchouc situées sur les pieds peuvent être réglées pour faciliter leurs positionnements sur le fond d'une baignoire légèrement incurvée. Vous pouvez les ajuster en tournant les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon l'ajustement requis.




Les ventouses en caoutchouc sont amovibles et peuvent être placées dans la partie la plus étroite du Floorsitter pour s'adapter à la largeur du fond de votre baignoire. Vous devez vous assurer que les ventouses sont positionnées de manière symétrique de chaque côté du Floorsitter. Avec 4 ou 6 pieds il devrait être stable.

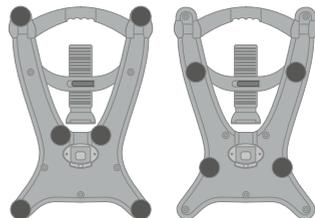

Suite →

9.2.1 Placement de la plateforme Floorsitter


Une fois que la plateforme Floorsitter est en place assurez-vous que le bras d'inclinaison est réglé sur la position la plus haute.

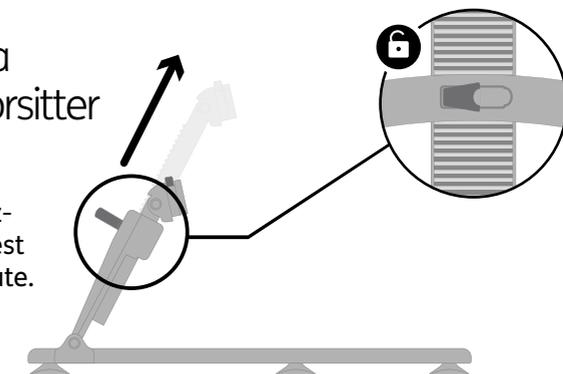

9.2.2 Assembler l'assise du Splashy

1


Avant d'assembler le Splashy au Floorsitter, le dossier et le siège doivent être assemblés.

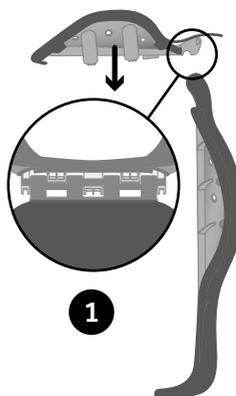

2


Tener le dossier du Splashy verticalement avec les encoches vers le haut. Utiliser l'autre main pour insérer les encoches de l'assise dans celles du dossier.

Retourner la base de l'assise dans la direction opposée pour verrouiller le système de fixation entre l'assise et le dossier. Une fois fixé, placer le volet en mousse de la charnière sous la mousse du dossier.

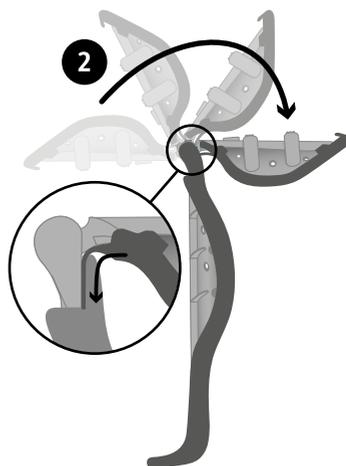


09.2.3 Attacher et régler le harnais et les cales-tronc


- 1 Pour fixer les sangles du harnais et les cales-tronc sur l'assise et le dossier du Splashy introduire le bouton à bascule dans les trous appropriés.
- 2 Sécourir en tournant le bouton à bascule latéralement sous le siège.

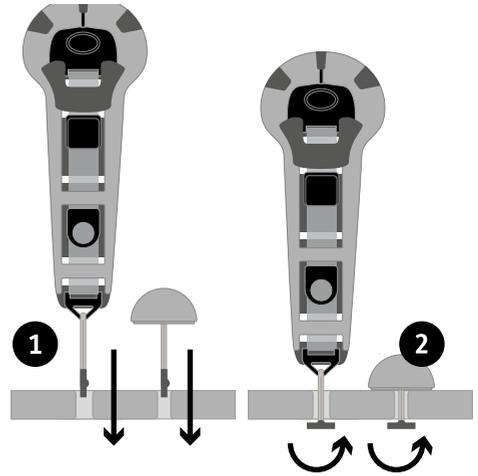

Connecter la sangle située au niveau de l'épaule et la sangle latérale comme sur le schéma ci-contre.

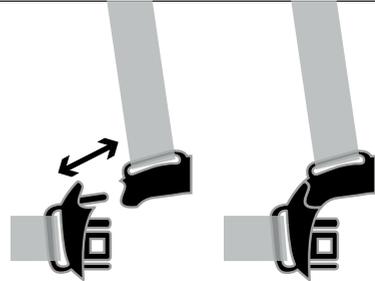


Pour vous assurer que les sangles sont placées du bon côté du Splashy, veuillez vous référer au schéma la boucle doit être placée comme ci-contre.

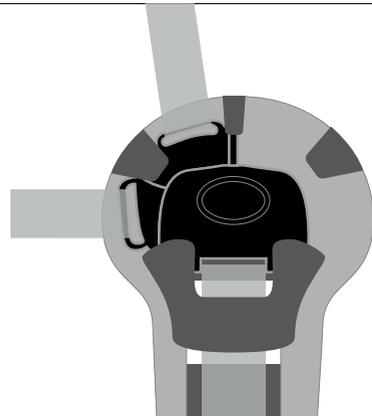


9.2.4 Installer le harnais 5 points

- 1 Insérer le bouton à bascule situé au niveau de l'aine à la base de l'assise du Splashy.
- 2 Insérer le bouton à bascule situé au niveau de l'épaule gauche à travers le trou à la hauteur qui correspond à votre enfant.
- 3 Insérer le bouton à bascule de la sangle latérale gauche dans le trou situé sur le côté du dossier.
- 4 Répéter le même processus pour la sangle d'épaule droite et la sangle latérale.
- 5 Une fois que toutes les sangles sont solidement fixées connecter les à la boucle pour créer un harnais 5 points.
- 6 Les sangles du harnais sont entièrement ajustables en déverrouillant la pince puis en relâchant ou en tendant la sangle en fonction de l'ajustement souhaité.

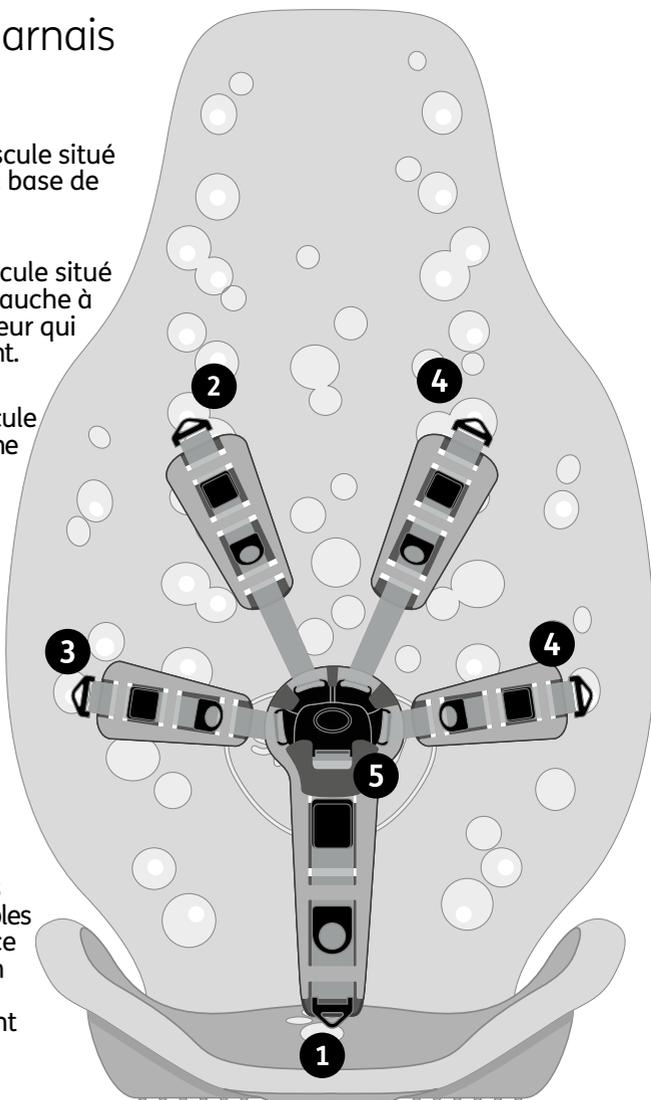


Astuce – Quand vous êtes satisfait de votre réglage vous pouvez enfilez la partie restante de la sangle dans les passants en mousse du harnais pour le ranger.

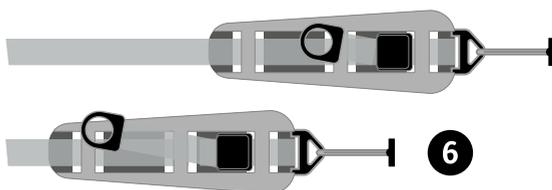

9.2.5 Installer le harnais 3 points


- 1 Insérer le bouton à bascule de la sangle latérale gauche sur le côté du dossier.
- 2 Répéter l'opération pour le côté droit du dossier.
- 3 Une fois que toutes les sangles sont solidement fixées connecter les à la boucle pour créer un harnais 3 points.

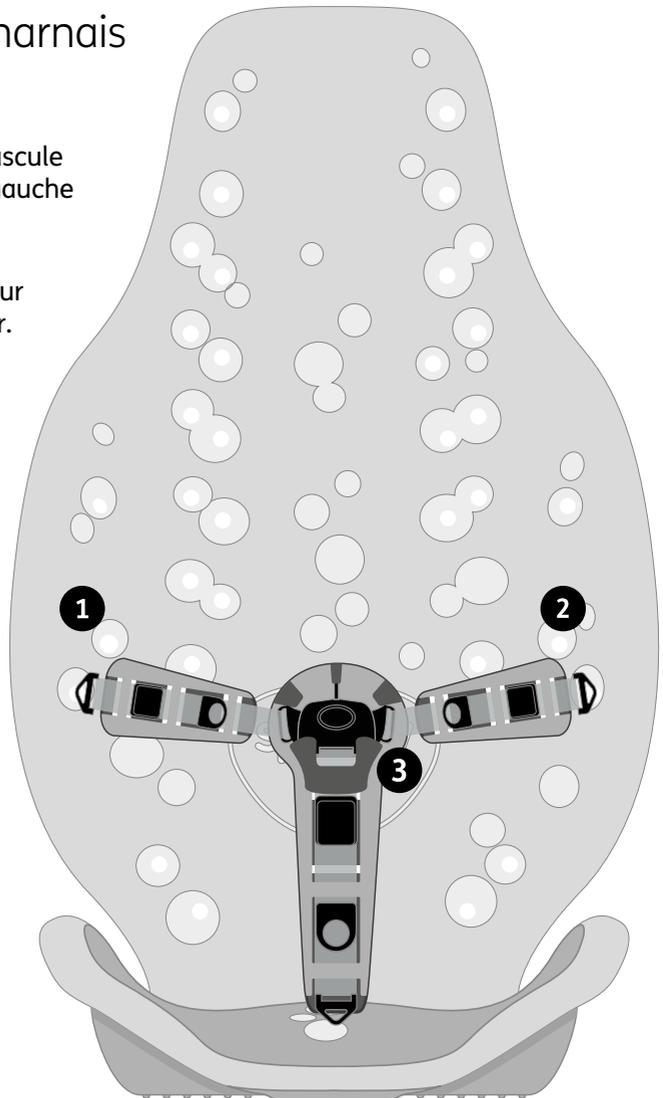


Ne pas passer d'un harnais 5 points à un harnais 3 points quand l'enfant est dans le bain.

9.2.6 Montage du Splashy sur la plateforme Floorsitter

- 1 C'est la partie inférieure de l'assise du Splashy qui s'enclenche sur la plateforme Floorsitter.
- 2 Assurez-vous que l'assise est alignée au centre de la plateforme Floorsitter, puis déplacer l'assise vers l'avant, de sorte que l'encoche située sous l'assise glisse dans le système de verouillage de la plateforme Floorsitter.
- 3 Lorsque l'assise s'enclenche sur la plateforme Floorsitter vous entendrez un "clic" ce qui signifie que le siège est bien verrouillé.

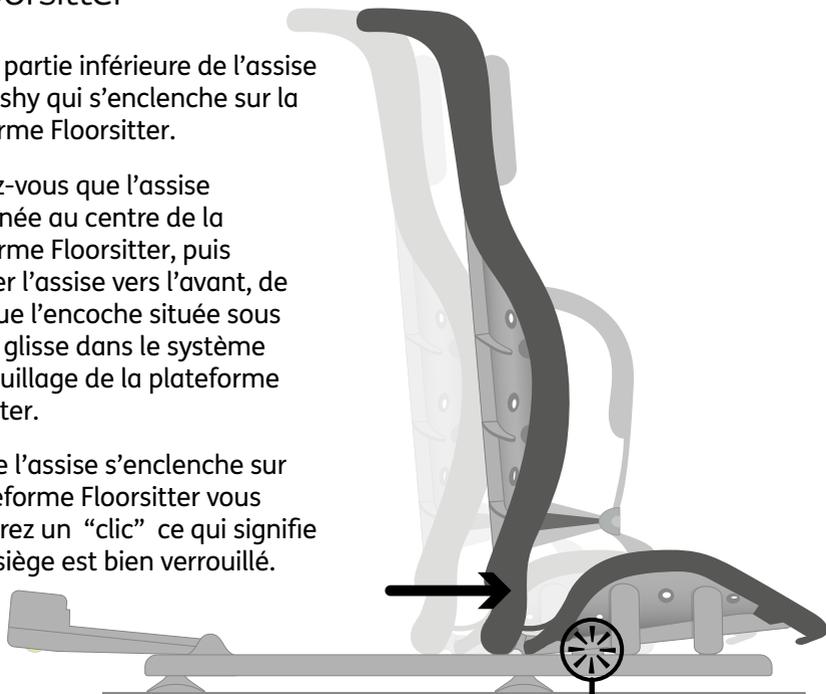


Si vous entendez le "clic" sonore cela signifie que l'assise et le dossier sont correctement assemblés.

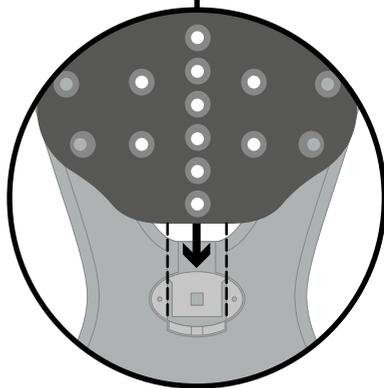

Avant de fixer le bras d'inclinaison assurez-vous qu'il est ajusté au plus haut.


Avec une main, tenez le Splashy puis avec l'autre main presser le bouton jaune puis l'insérer dans la fente.

Une fois assemblé correctement, vous devez entendre un "clic" caractéristique.

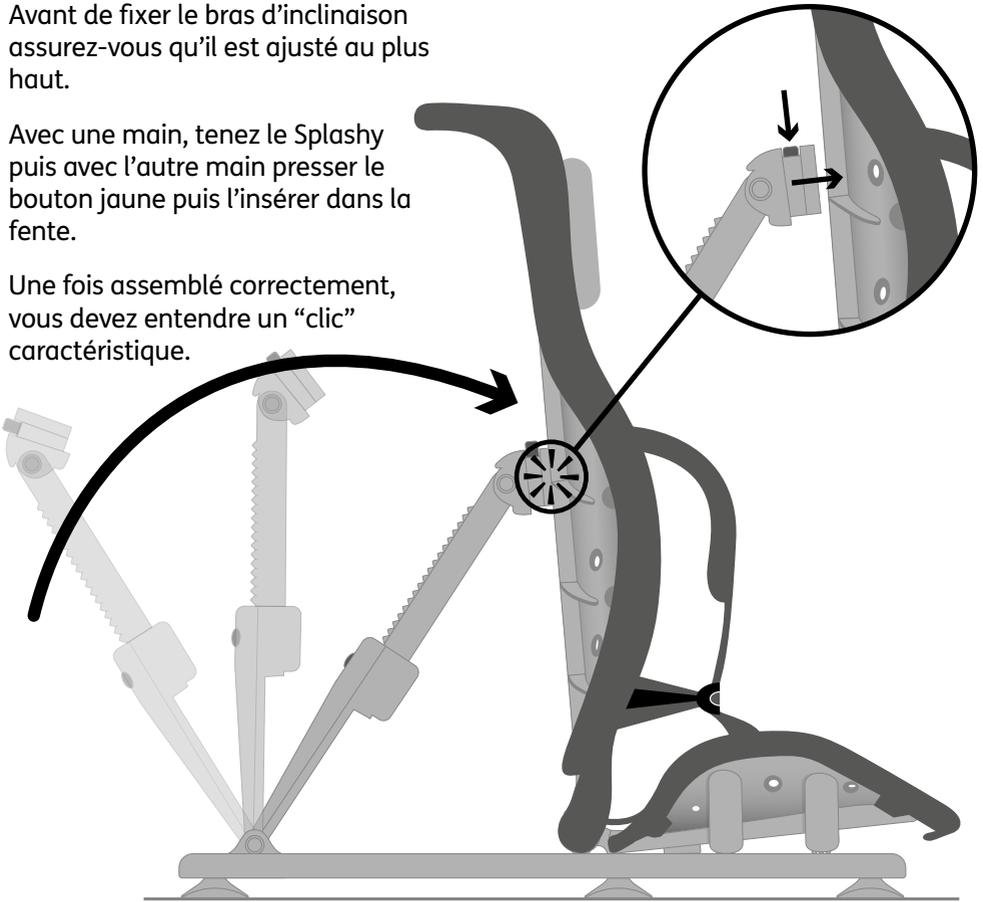

Le schéma ci-contre montre ce à quoi doit ressembler le Splashy quand il est entièrement assemblé.

Vous pouvez maintenant installer en toute sécurité votre enfant dans le Splashy.

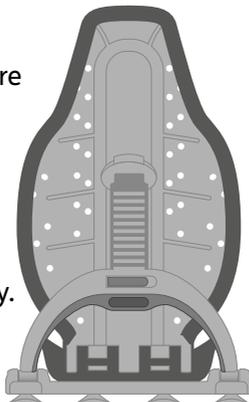


9.3 Les cales-tronc

Une fois que votre enfant est sécurisé dans le Splashy grâce au harnais, vous pouvez ajouter des cales-tronc pour fournir un soutien supplémentaire à votre enfant.

Les cales-tronc peuvent être utilisés comme appui-tête (cf. schéma) mais également comme plot d'abduction, comme cales jambes ou encore pour éviter à l'enfant de glisser sur le siège.

Si vous sentez que l'enfant a besoin d'un soutien renforcé dans le Splashy des cales-tronc supplémentaires peuvent être achetés le site Firefly, dans la rubrique accessoire.

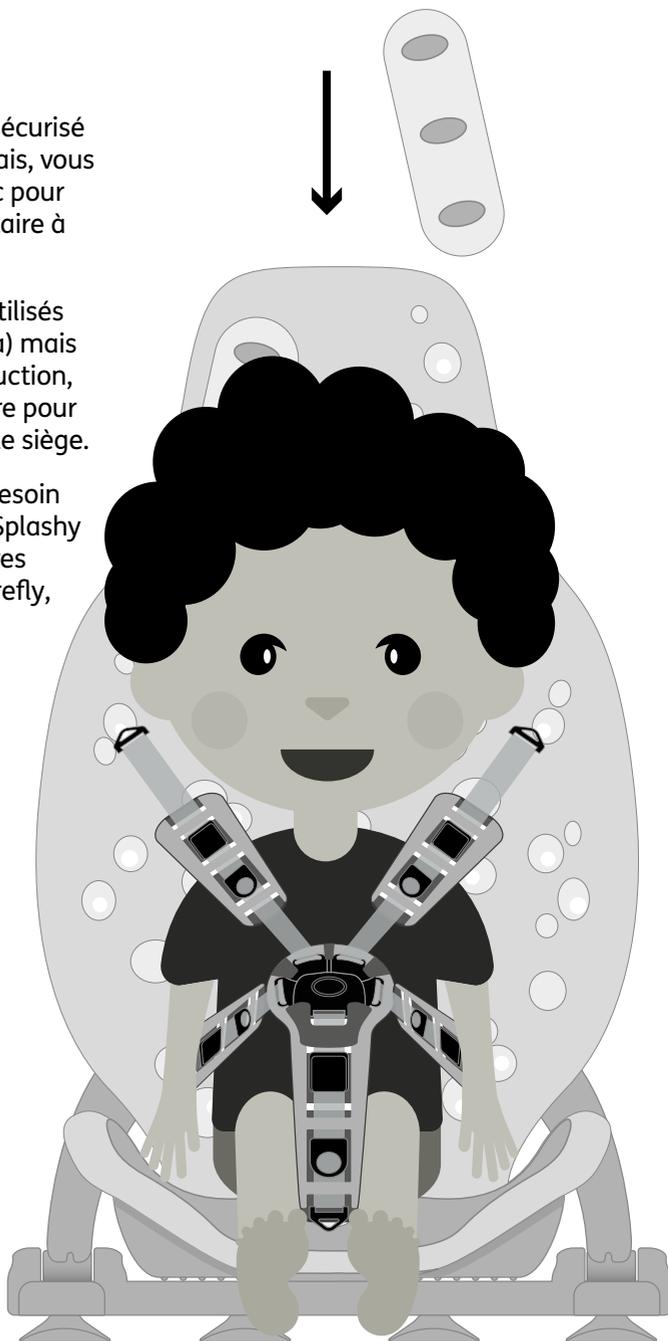


9.3.1 Ajustement des cales-tronc pour un soutien renforcé à divers endroits

Les cales-tronc peuvent être utilisés comme :

1. Appui-tête – placer les cales-tronc sur le côté droit et gauche de la tête de votre enfant.




2. Support de nuque – placer le cale-tronc latéralement par rapport à la nuque de votre enfant.

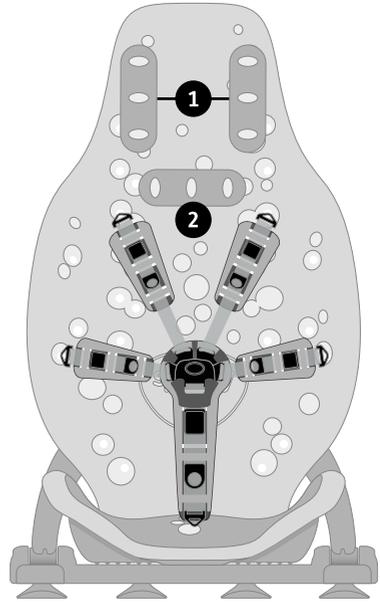

3. Plot d'abduction – Placer le cale-tronc entre les jambes de votre enfant (pour éviter les croisements de jambe).

4. Cale-jambes – Placer un cale-tronc sur les côtés droit et gauche de votre enfant (ce qui empêche votre enfant d'être penché d'un côté du siège).


5. Cale-tronc antidérapant – placer le cale-tronc à la base du siège devant votre enfant (ce qui empêche votre enfant de glisser vers l'avant.) Certains enfants sont plus à l'aise si le cale-tronc est placé au niveau de la sangle située au niveau de l'aîne.

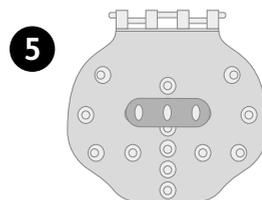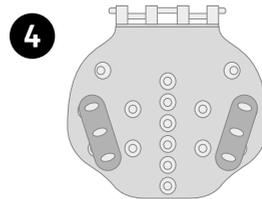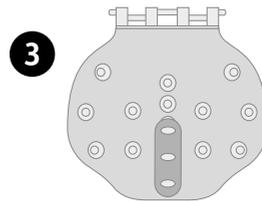

9.4 Ajuster le harnais pour le bain

Retirer la sangle au niveau de l'épaule pour créer un harnais 4 points et ainsi laver votre enfant.

Pour enlever la sangle située au niveau de l'épaule détacher le bouton à bascule situé à l'arrière du dossier.

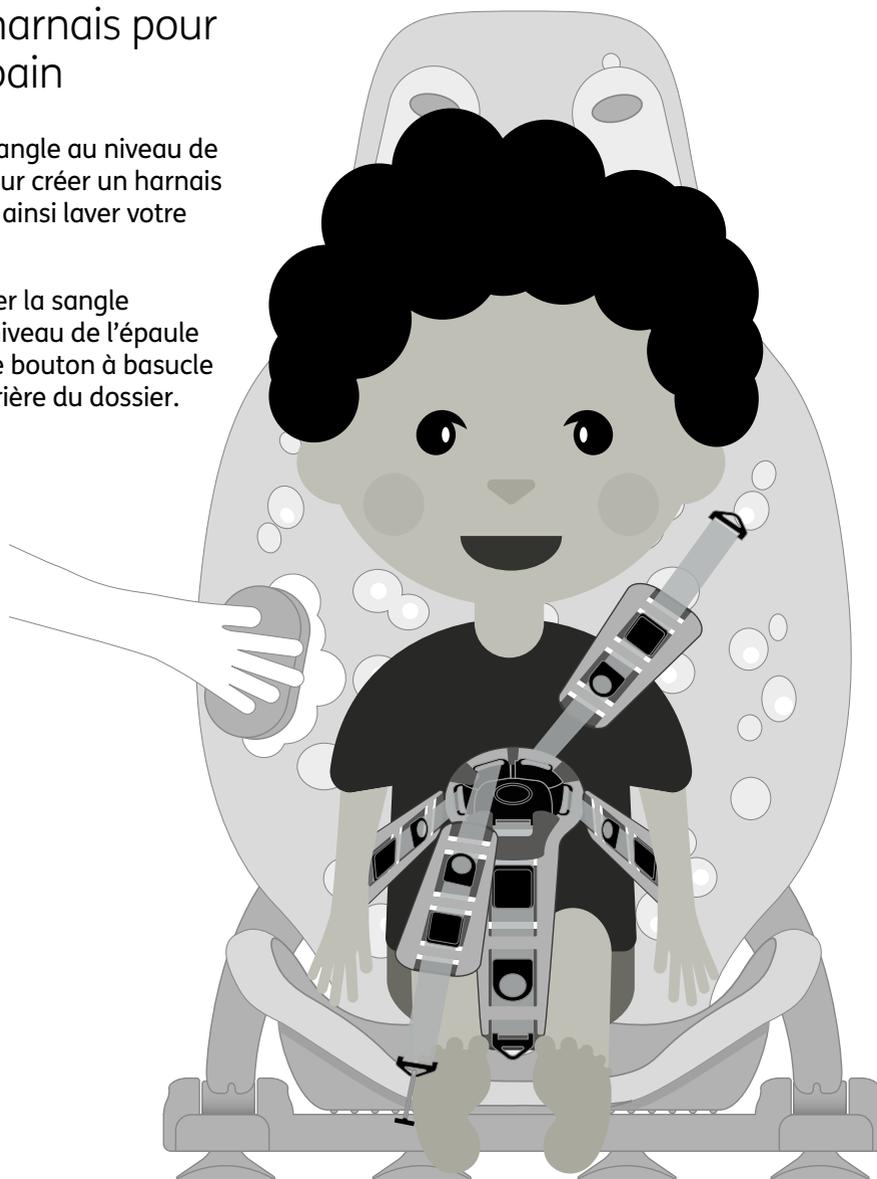


Enlever la sangle latérale pour créer un harnais 4 points et ainsi laver la moitié du corps de l'enfant.

Pour enlever la sangle latérale détacher le bouton à bascule situé à l'arrière du dossier.



9.5 Raccourcir les sangles des épaules et latérales du harnais

Dans certain cas il est nécessaire d'ajuster la taille des sangles d'épaules et latérales pour l'adapter à des enfants plus petits.

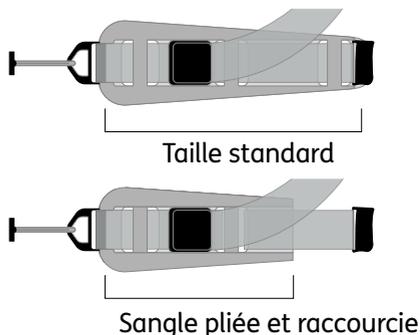


1 Quand vous recevrez le Splashy les sangles ressembleront au schéma ci-contre. Pour ajuster les sangles veuillez suivre les instructions ci-dessous.




2 Enlever les sangles transparentes de la sangle en mousse.




3 Plier l'extrémité la plus étroite de la sangle en mousse et assurez-vous que les ouvertures s'alignent.

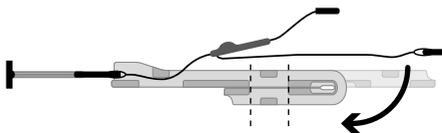

4 Passez la sangle à travers la première ouverture doublée en mousse.

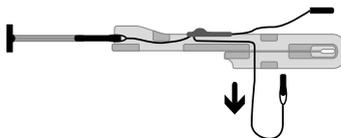


5 Puis tirer complètement la sangle pour la repasser dans la deuxième ouverture puis tirer et resserrer la sangle.

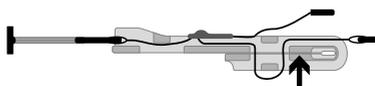


9.5.1 Raccourcir la sangle au niveau de l'aine

Dans certains cas il est nécessaire de raccourcir la taille de la sangle située au niveau de l'aine, pour l'adapter à un enfant plus petit.

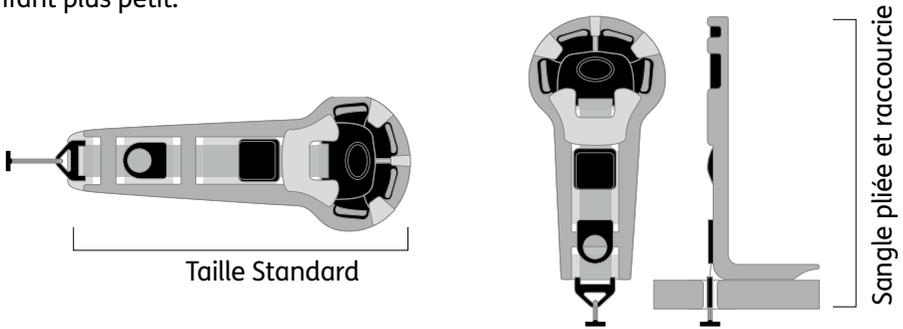

- 1 Pour diminuer la longueur de la sangle située au niveau de l'aine comme sur le schéma, il est nécessaire de réaliser le réglage ci-contre en suivant les instructions ci-dessous.
- 2 Enlever les sangles transparentes de la sangle en mousse.
- 3 Plier la sangle en mousse vers l'arrière pour créer une sangle plus courte, puis passer la sangle transparente avec le bouton à bascule dans le passant situé à la base de l'assise.

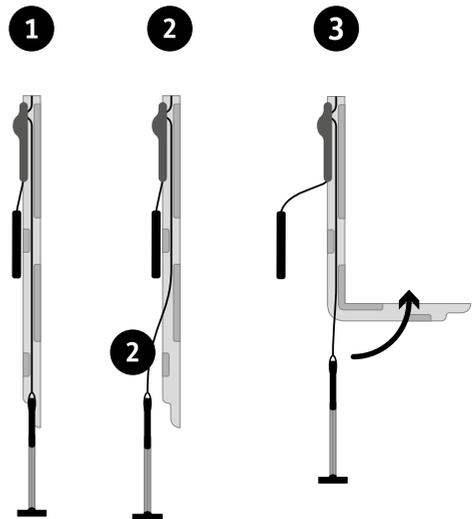

9.6 Positions d'inclinaisons recommandées


Inclinaison verticale – Si votre enfant tolère la position assise et possède un bon contrôle du tronc, il est possible d'utiliser une inclinaison verticale.



Inclinaison intermédiaire – Nous recommandons de placer le Splashy dans une position intermédiaire d'inclinaison si l'enfant a besoin d'être relevé dans son bain.



Inclinaison maximum du siège – Nous recommandons que le Splashy soit placé dans la position d'inclinaison maximum pour faciliter le transfert de votre enfant dans le siège du bain.

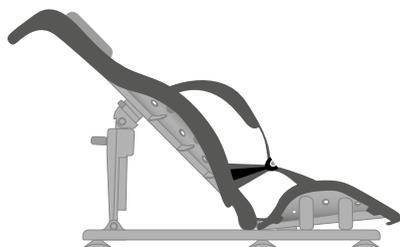


9.6.1 Utiliser la fonction d'inclinaison


Une fois que votre enfant est complètement sécurisé et installé la fonction d'inclinaison peut être utilisée.

Soyez prudent lorsque vous utilisez l'angle d'inclinaison. Il est important de réaliser en douceur le mouvement d'inclinaison pour ne pas stresser l'enfant.

Pour positionner le Splashy dans une position verticale, placer une main sur la poignée du Splashy **A** située sur la partie supérieure du dossier pour prendre appui et l'autre main sur le clip jaune pour incliner le bras de levier d'inclinaison du Floorsitter. **B**

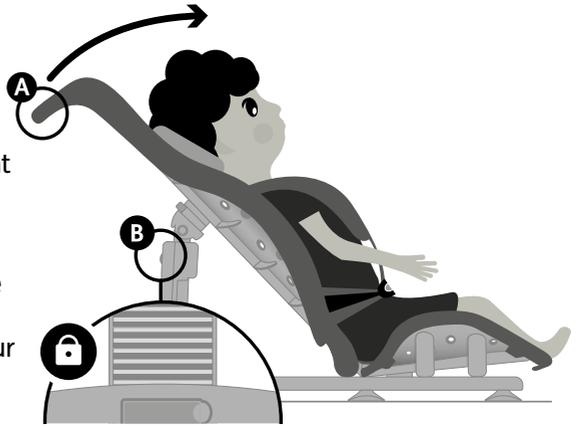

Déverrouiller le clip **A** et positionner le siège de bain à la verticale dans une position qui convient à votre enfant. Fixer ensuite le clip sur le Floorsitter. Vous entendrez un "clic", cela signifie que celui-ci est verrouillé.

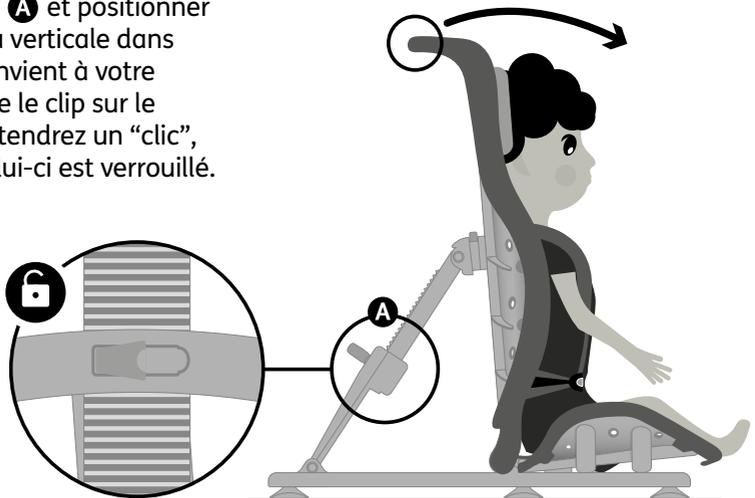


9.7 Démontage et désinstallation du Splashy après son utilisation dans le bain

Enlever l'enfant du Splashy et vider la baignoire.





Se reporter au chapitre 7 pour obtenir des conseils pour une utilisation en toute sécurité.

Pour enlever le Splashy du Floorsitter, appuyer sur le bouton jaune du bras d'inclinaison et basculer le dossier vers l'avant.

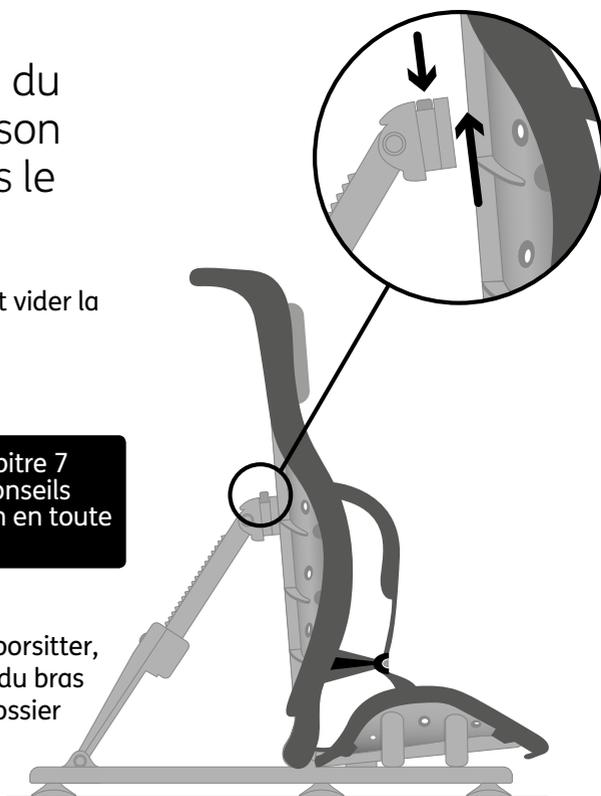


Pour enlever la base du siège du Floorsitter, tirer sur la languette verte **A** et faire glisser vers l'arrière le siège, puis le soulever. **B**

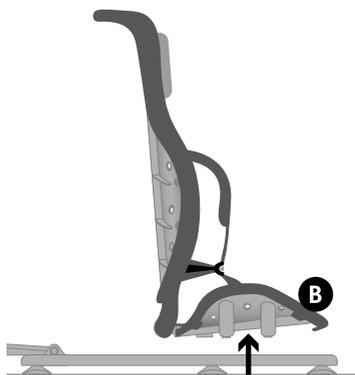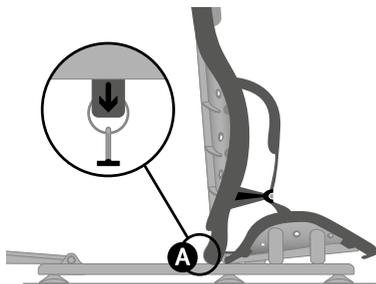


Pour retirer la plateforme Floorsitter du bain, soulever légèrement la plateforme pour décoller les ventouses.

Si les ventouses ne se décollent pas au premier essai, refaire l'opération sans trop forcer.

Placer votre main sous les ventouses pour les décoller (ne pas utiliser d'outils).

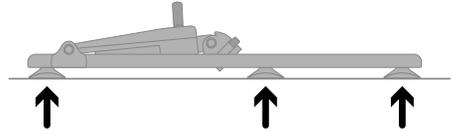

Placer le Splashy à la verticale de ce côté (cf. schéma) et détacher la base du siège du dossier en le pliant sur lui-même, afin de l'enlever de la charnière.

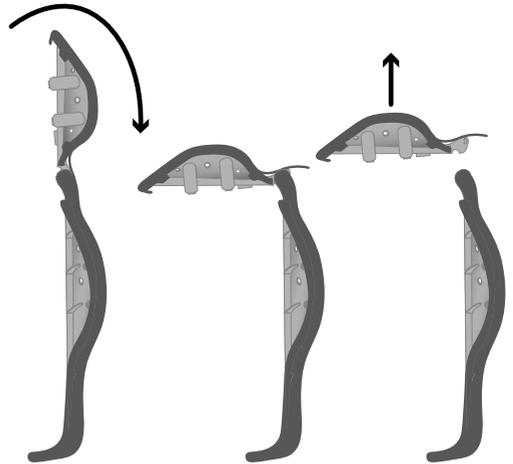


9.8 Sécher le Splashy

Toujours veiller à essuyer le Splashy avant de le laisser sécher et de le ranger.



Essuyer la plateforme Floorsitter et la sécher. (Pour de plus amples informations se référer au chapitre 5).

Pour le faire sécher, il est plus facile d'ignorer la dernière étape (voir le chapitre 9.6) et donc de conserver la base du siège, le dossier et la plateforme Floorsitter en une seule pièce, comme dans l'exemple.


Appuyer sur le bouton jaune du bras d'inclinaison, et tirer le dossier vers l'avant du siège.

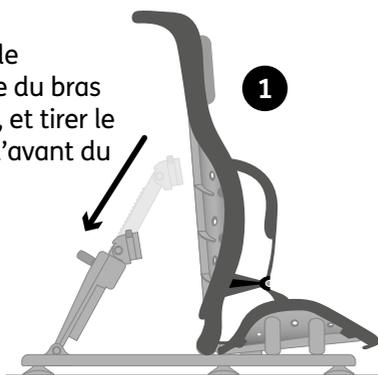

Plier le bras de levier d'inclinaison vers l'avant comme indiqué par la flèche sur le schéma ci-contre.

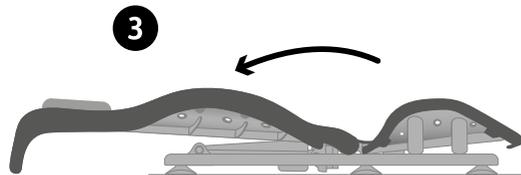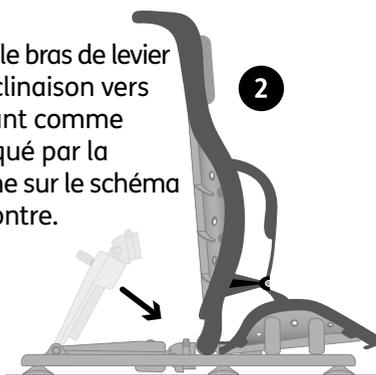

Incliner le dossier sur le Floorsitter en suivant le schéma ci-dessus.

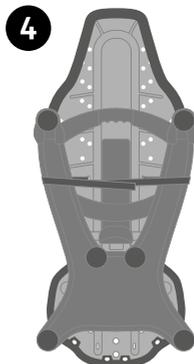

Utiliser les sangles velcro pour maintenir la plateforme Floorsitter à plat contre le siège Splashy.

10 : Guide des tailles

| Informations techniques du siège de bain Splashy | |
|---|-----------|
| Hauteur du dossier | 61 cm |
| Largeur du dossier | 38,5 cm |
| Profondeur d'assise | 30 cm |
| Largeur d'assise | 35 cm |
| Largeur de la plateforme | 42 cm |
| Hauteur de la plateforme | 63 cm |
| Poids maximum | 30kg |
| Tranche d'âge | 1 à 8 ans |



Firefly by Leckey,
19c Ballinderry Road,
Lisburn,
Northern Ireland,
BT28 2SA

UK 0800 318 265

www.fireflyfriends.com



LS591-01