

LES COUSSINS THÉRAPEUTIQUES




ROLL

COUSSIN ROULEAU CYLINDRIQUE MODELABLE À DÉPRESSION

Le STABILO ROLL est un support adapté aux avant-bras en cas d'hémiplégie par exemple, surtout lorsque le membre est en appui horizontal.

Pendant les exercices de kinésithérapie, et lorsque l'enfant se repose, allongé sur le côté, le coussin peut être placé entre les jambes, dépassant d'avant en arrière, tout en positionnant les hanches de façon adaptées (la position adaptée à l'articulation de hanche).

DIMENSIONS

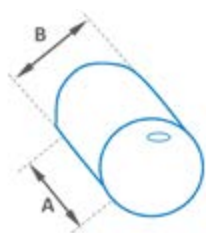

[cm]	A	B
S	50	18
M	80	25
L	80	35

STABILO

Est un système de coussins et matelas de positionnement modelable à dépression. Il fonctionne sur le principe du matelas coquille, on aspire l'air du coussin après l'avoir façonné à la forme désirée. Une pompe spéciale aide à dégonfler l'air du coussin lui permettant de se raffermir tout en conservant la forme voulue. La forme et la dureté des coussins et matelas STABILO peuvent être modifiées fréquemment de façon très simple.

Les produits STABILO sont fabriqués dans une usine polonaise à Cracovie qui contrôle la qualité des produits à chaque étape de production.

